



GAMINIO INSTRUKCIJA

Vaikštynė Quadri-Light 286E



Gamintojas: VERMEIREN



UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

Vaikštyinė Quadri-Light


- Puiki, lengva ir patogi, sulankstomas vaikštyinė su 4 ratukais.
- Sudedamas rėmas pagamintas iš aliuminio.
- Tinkamiausia žmonėms, kurie turi jėgos valdyti stabdžius, reikalinga atrama kai trūksta pusiausvyros.
- Lygi plastiko sėdynė bei medžiaginė atrama nugarai.
- Reguliuojamo aukščio 80 - 90 cm.
- Plotis tarp rankenų - 45 cm. Vaikštyinės plotis (išorinis) 65 cm. Aukštis nuo žemės iki sėdynės - 61 cm.
- Vaikštyinės svoris: 7,25 kg.
- Maksimali apkrova: 130 kg.
- Pažymėta CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.
- Garantija 1 metai.

Naudojimas


Vaikštyinė kompensuos adekvačios atramos kojomis trūkumą atsiremiant į ją bei judant naudojantis viršutinėmis galūnėmis arba krūtine. Vaikštyinė suteiks geresnį stabilumą, atramą ir saugumą vaikstant. Vaikštyinė galima naudotis tiek viduje, tiek lauke. Tačiau ja negali naudotis asmenys, turintys akivaizdžiai silpnas rankas ir/ar silpną rankų funkciją, ir asmenys, turintys pusiausvyros problemų. Sėdyne-suoliuku galima naudotis tik kai parkavimo stabdis yra užfiksuotas.

Montavimas


1. Išimkite vaikštyinę iš pakuotės.
2. Atlaisvinkite velkro juostas.
3. Paverskite vaikštyinę ant šono.
4. Atlenkite galinius ratukus, kol skylės bus vienodai viena prieš kitą.
5. Užfiksuokite ratų padėtį žr. pav. 2

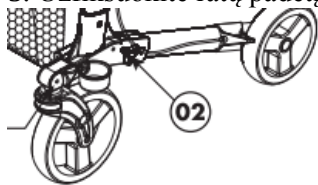

6. Atlenkite priekinius ratukus, kas skylės būtų viena prieš kitą.
7. Užfiksuokite priekinių ratukų padėtį, žr. pav. 5

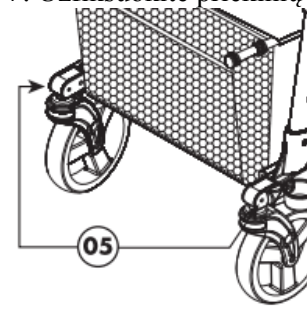

8. Paverskite vaikštyinę ant kito šono ir pakartokite 4-7 žingsnius kitoje pusėje.
9. Vaikštyinės išskleidimas/ naudojimui:
 - Išskleisti ir paruošti naudojimui vaikštyinę galima spaudžiant ant stūmimo rankenų.
 - Atlenkite atsisėdimo sėdynę į priekį, kol užsifiksuos mechanizmas. Žr. pav. 4

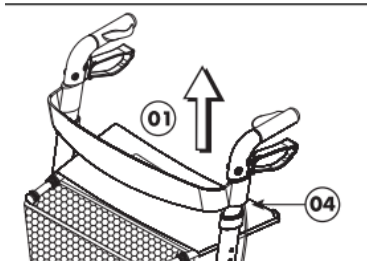


-Patikrinkite ar vaikštynę tvirtai išsiskleidė.


11. Nustatykite stūmimo rankenas į pageidaujamą aukštį. (žiūrėkite toliau).

Vaikštyinės suskleidimas/suglaudimas

Švelniai ištraukite sėdynės rankenėlę, ir kelkite sėdimą dalį aukštin, tol kol atsilaisvins fiksavimo mechanizmas, ir be pasipriešinimo vaikštyinė galės būti suglaudžiama. (tai galima padaryti laikant vaikštynę pastatytą tiesiai). Žr. pav. 1

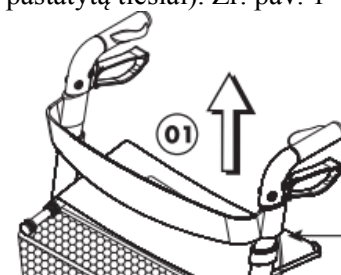


Suskleiskite vaikštynę spaudžiant stūmimo rankenas arba sustumiant ratukus jų fiksacijos vietoje. Žr. pav. 2

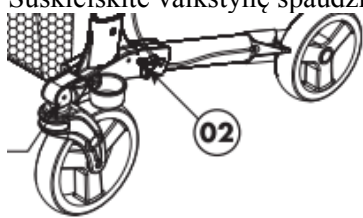


Stūmimo rankenos

Stūmimo rankenų aukštis reguliuojamas spaudžiant fiksatorių **žr pav. 1**. Atlaisvinkite/atblokuokite rankeną iš šono **žr pav. 1**, kad galėtumėte sureguliuoti stūmimo rankenų aukštį. Stovint tiesiai rankenos turi būti jūsų riešų aukštyje. Rankas laikykite laisvai. Vėl tvirtai užfiksуйте rankenas. Minimalų ir maksimalų reguliavimą galite stebėti pagal žymas ant vidinio vamzdelio, kuris įsikiša į rėmą. Įsitikinkite, kad abi stūmimo rankenos yra sureguliuotos vienodame aukštyje.

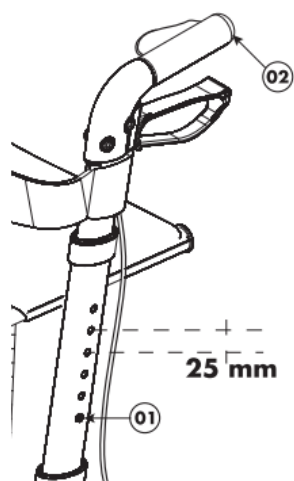

Stabdžių sistema

Vaikštyinė turi daugiavfunkcinę stabdžių sistemą. Stabdžių rankenos po stūmimo rankenomis yra įprastiniai stabdžiai ir parkavimo stabdžiai. Norėdami pasinaudoti trumpo sustabdymo stabdžiais (įprastiniais stabdžiais), kelkite stabdžių rankeną į viršų (link stūmimo rankenos). Norėdami pasinaudoti ilgo sustabdymo stabdžiais (parkavimo stabdžiais), stumkite stabdžių rankeną žemyn, kol išgirsite stabdžių užsifiksavimo garsą. Dabar ratai (naudokite vienu metu kairįjį ir dešinįjį parkavimo stabdžius) yra užblokuoti tol, kol vėl pakelsite į viršų parkavimo stabdžius. Prieš pradėdami naudotis vaikštyne, patikrinkite stabdžių veikimą.

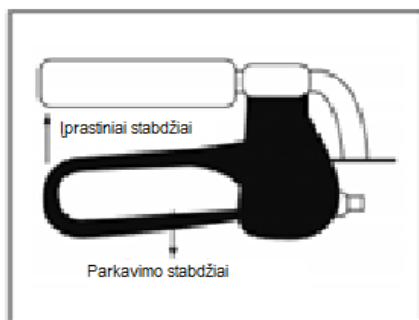

Saugumo instrukcijos

Įsitikinkite, kad vaikštyinės ratų neblokuoja akmenys ar jokie kiti objektai. Įsitikinkite, kad laidai ar stabdžiai neužblokuoti ar nedeformuoti. Prieš pradėdami naudotis vaikštyne įsitikinkite, kad stabdžiai ar vaikštyinė visada yra parkavimo režime. Kai stovite patogiai ir stabiliai, galite atblokuoti parkavimo stabdžius. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar blokavimo rankena ant stūmimo rankenos yra tvirtai užfiksuota. Patikrinkite, ar tinkamai veikia apsauga nuo nepageidaujamo sulankstymo/išlankstymo. Pradėkite eiti su vaikštyne tik kai stovite patogiai ir kai jūsų abi rankos yra ant stūmimo rankenų.

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"
GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: **Vaikštytė, Quadri – Light, 4 ratukų**

Modelis: **286E**

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____ PVM Sąskaitos-faktūros SLS Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama **12 mėn.** garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

info@slaugivita.com

www.slaugivita.com

1. **Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____
(Pareigos, vardas; pavardė; parašas)

2. **Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____
(Pareigos, vardas; pavardė; parašas)

Dėmesio: per garantinio aptarnavimo laikotarpį, remontuotinas prekės paims kurjeriai. Todėl, prašome supakuoti prekę (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti prekę mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekę bus išsiusta atgal.