



GAMINIO INSTRUKCIJA

Vaikštynė 286I



Gamintojas: VERMEIREN



UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

Vaikštyne 286I

Puiki, lengva ir patogi vaikštyne su 4 ratukais.

-Sudedamas rėmas.

-Reguliuojamo aukščio stūmimo rankenos nuo 80 iki 90cm.

-Stabdžiai ant rankenų, judėjimo ir parkavimo.

-Sėdynė-suoliukas, krepšelis ir padėklas.

-Išlaiko 120kg.

-Vaikštynės svoris tik 9kg (be krepšelio ir padėklo).

Naudojimas


Vaikštyne kompensuos adekvačios atramos kojomis trūkumą atsiremiant į ją bei judant naudojantis viršutinėmis galūnėmis arba krūtine. Vaikštyne suteiks geresnį stabilumą, atramą ir saugumą vaikstant. Vaikštyne galima naudotis tiek viduje, tiek lauke. Tačiau ja negali naudotis asmenys, turintys akivaizdžiai silpnas rankas ir/ar silpną rankų funkciją, ir asmenys, turintys pusiausvyros problemų. Sėdyne-suoliuku galima naudotis tik kai parkavimo stabdis yra užfiksuotas.

Montavimas

- Įdėkite stūmimo rankenas į priekinį rėmą.
- Jei reikia, sureguliuokite prie stabdžių prijungtus laidus.
- Nustatykite stūmimo rankenas į pageidaujamą aukštį. (žiūrėkite toliau).

Stabdžių sistema (1 pav.)

Vaikštyne turi daugiafunkcinę stabdžių sistemą. Stabdžių rankenos po stūmimo rankenomis yra įprastiniai stabdžiai ir parkavimo stabdžiai. Norėdami pasinaudoti trumpo sustabdymo stabdžiais (įprastiniais stabdžiais), kelkite stabdžių rankeną į viršų (link stūmimo rankenos). Norėdami pasinaudoti ilgo sustabdymo stabdžiais (parkavimo stabdžiais), stumkite stabdžių rankeną žemyn, kol išgirsite stabdžių užsifiksavimo garsą. Dabar ratai (naudokite vienu metu kairįjį ir dešinįjį parkavimo stabdžius) yra užblokuoti tol, kol vėl pakelsite į viršų parkavimo stabdžius. Prieš pradėdami naudotis vaikštyne, patikrinkite stabdžių veikimą.

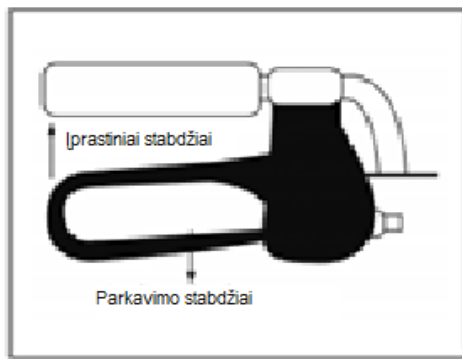

Stūmimo rankenos

Stūmimo rankenų aukštis reguliuojamas. Atlaisvinkite/atblokuokite rankeną iš šono, kad galėtumėte sureguliuoti stūmimo rankenų aukštį. Stovint tiesiai rankenos turi būti jūsų riešų aukštyje. Rankas laikykite laisvai. Vėl tvirtai užfiksuokite rankenas. Minimalų ir maksimalų reguliavimą galite stebėti pagal žymas ant vidinio vamzdelio, kuris įsikiša į rėmą. Kai viršijate maksimalų sureguliovimą -

Saugumo instrukcijos

Įsitikinkite, kad vaikštytės ratų neblokuoja akmenys ar jokie kiti objektai. Įsitikinkite, kad laidai ar stabdžiai neužblokuoti ar nedeformuoti. Prieš pradėdami naudotis vaikštyne įsitikinkite, kad stabdžiai ar vaikštytė visada yra parkavimo režime. Kai stovite patogiai ir stabiliai, galite atblokuoti parkavimo stabdžius. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar blokavimo rankena ant stūmimo rankenos yra tvirtai užfiksuota. Patikrinkite, ar tinkamai veikia apsauga nuo nepageidaujamo sulankstymo/išlankstymo. Pradėkite eiti su vaikštyne tik kai stovite patogiai ir kai jūsų abi rankos yra ant stūmimo rankenų.

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"
GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: **Vaikštytė, 4 ratukų**

Modelis: **286I**

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____ PVM Sąskaitos-faktūros SLS Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama **12 mėn.** garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju: Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____
(Pareigos, vardas; pavardė; parašas)

2. **Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____
(Pareigos, vardas; pavardė; parašas)

Dėmesio: per garantinio aptarnavimo laikotarpį, remontuotinas prekės paims kurjeriai. Todėl, prašome supakuoti prekę (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti prekę mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekę bus išsiusta atgal.