


Produkto naudojimo instrukcija omiVista Mobii V4

Įdiegimas, konfigūravimas, priežiūra ir palaikymas

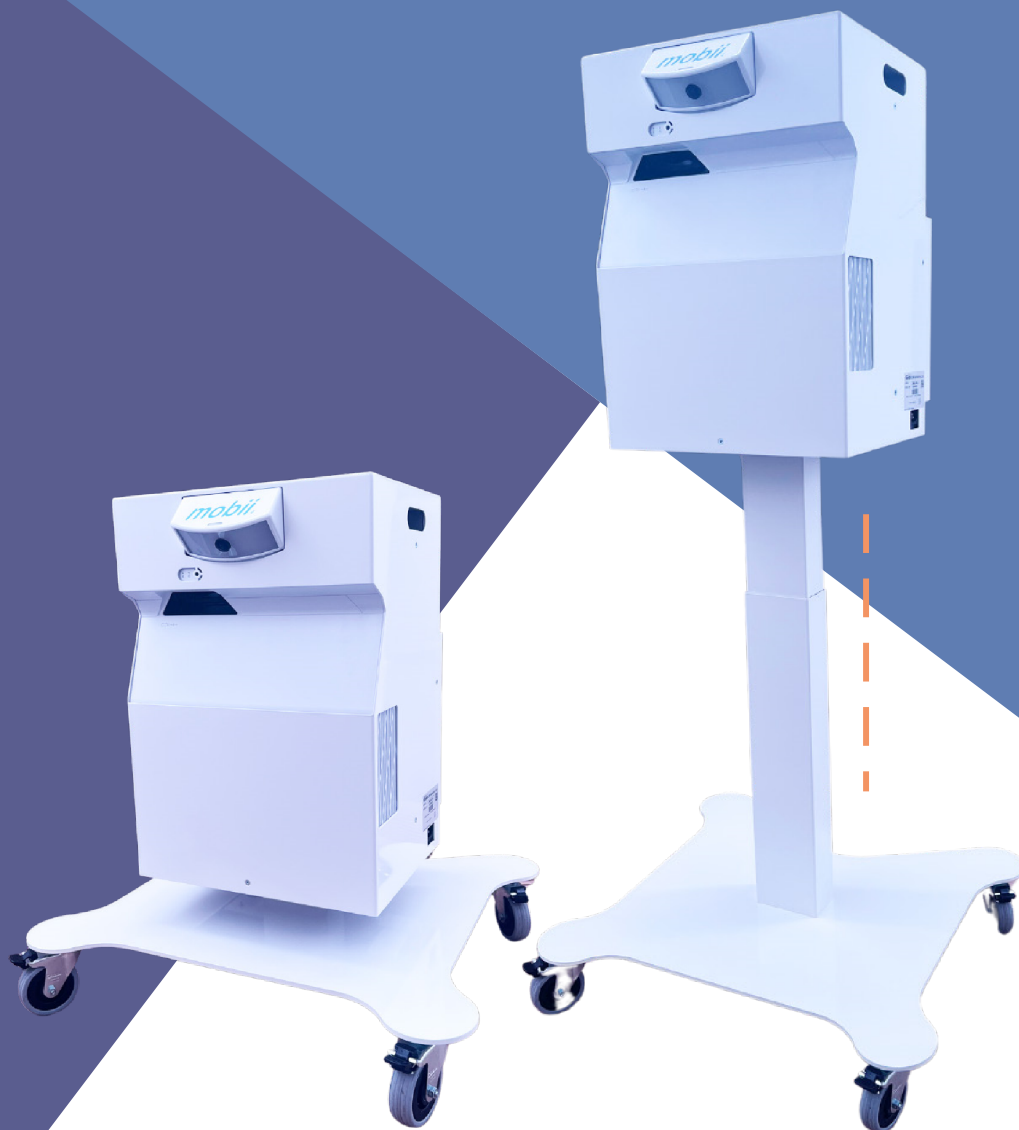

omiVista
mobii

Turinys

Pirmiausia perskaitykite	3
Saugos informacija. Pagrindinis įrenginys	3
Lazerio radiacijos saugos informacija	4
Produkto apžvalga	6
Sistemą sudaro:	6
Susipažinimas su „omiVista Mobii’s” valdikliais:	7
Smart View	7
Projektoriaus būsenos lemputės	7
Sistemos valdymas	8
Belaidis nuotolinio valdymo pultas	8
Belaidė klaviatūra	8
USB imtuvas	8
Pradžia	9
Paleidimas	9
Išjungimas	9
Aukščio reguliavimas	9
Fokusavimo reguliavimas	9
Pagrindinis ekranas	9
Taikomosios programos	10
Sistemos nustatymai	10
Sistemos nustatymai	10
Kameros kalibravimas	11
Grindų kalibravimas	11
Stalo kalibravimas	12
Belaidžio pulto ir klaviatūros kalibravimas	13
Valymas ir dezinfekcija	14
Specifikacijos	15
Projekcijos specifikacija	15
Galios specifikacijos	15
Projektoriaus lempos tarnavimo laikas	15
Svoriai ir matmenys	15

Pirmiausia perskaitykite

Saugos informacija

	Žaibas su rodyklės galvute lygiagrečiame trikampyje yra skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą gaminio gaubte, kuri gali būti pakankamai didelė, kad žmonėms kiltų elektros smūgio pavojus.
	Šauktukas lygiagrečiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie svarbias naudojimo ir techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas, pateiktas kartu su prietaisu pateikiamoje literatūroje..

ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI SUMAŽINTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENAUDOKITE ŠIO PRIETAISO LYJANT LIETUI AR DRĖGMĖJE. ĮRENGINIO VIDUJE YRA PAVOJINGA AUKŠTA ĮTAMPA. NEATDARYKITE SPINTELĖS, KREIPKITĖS DĖL APTARNAVIMO Į KVALIFIKUOTĄ PERSONALĄ.

Svarbi saugos instrukcija. Pagrindinis įrenginys

- Viduje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti naudotojas
- Neardykite ir nebandykite prižiūrėti šio įrenginio patys, kreipkitės tik į kvalifikuotą, apmokytą personalą, vietinį platintoją / perpardavėją arba „OM Interactive Ltd“.
- Tai nėra vaikams skirtas gaminytis ir nėra skirtas naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims arba tiems, kurie nebuvo išmokyti tai daryti.
- Nekelkite ir nenuleiskite šio įrenginio aukštyn/žemyn valdikliais, jei kyla pavojus, kad įrenginys atsitrenks į stalviršį ar išsikišusį paviršių arba kai gali kilti kūno dalių, ypač pirštų, įstrigimo tarp įrenginio ir paviršius projektuojamas ant ar bet kurio kito šalia esančio objekto.
- Neuždenkite gaminio naudojimo metu, naudokite pateiktą vinilo apsauginį gaubtą tik tada, kai įrenginys buvo išjungtas ir jam leidžiama atvėsti bent 5 minutes, o maitinimo laidas ištrauktas ir saugiai laikomas kišenėje įrenginio gale.
- Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Siekiant užtikrinti patikimą projektoriaus veikimą ir apsaugoti sistemą nuo perkaitimo, rekomenduojama prietaisą naudoti vietoje, kurioje neužstojama ventiliacija. Pavyzdžiui, nenaudokite prietaiso šalia sienų, užuolaidų ar tekstilės, kuri gali užblokuoti arba uždengti sistemos išmetimo arba oro įleidimo angas.
- Nedėkite jokių daiktų ant įrenginio viršaus.
- Nenaudokite prietaiso šalia vandens ar drėgmės. Norėdami sumažinti gaisro ir (arba) elektros smūgio pavojų, saugokite prietaisą nuo lietaus ar drėgmės.
- Nedirbkite šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, viryklės ar bet kokie kiti įrenginiai, pvz., stiprintuvai, kurie skleidžia šilumą.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus/papildomą įrangą.
- Nenaudokite įrenginio, jei jis buvo fiziškai sugadintas arba netinkamai naudotas. Fizinė žala / netinkamas naudojimas (bet tuo neapsiribojant):
 - ☞ Įrenginys buvo numestas.
 - ☞ Pažeistas maitinimo laidas arba kištukas.
 - ☞ Ant prietaiso išsiliejo skystis.
 - ☞ Prietaisas buvo paveiktas lietaus arba drėgmės.
 - ☞ Kažkas įkrito į prietaisą arba kažkas atsilaisvino viduje.

Lazerinės spinduliuotės saugos informacija

Šis gaminys klasifikuojamas kaip 1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS – 2 RIZIKOS GRUPĖ IEC60825-1: 2014 taip pat atitinka 21 CFR 1040.10 ir 1040.11 kaip 2 rizikos grupė, LIP (lazeriu apšviestas projektorius), kaip apibrėžta IEC 62471-5:Ed. 1.0. Daugiau informacijos rasite 2019 m. gegužės 8 d. pranešime Nr. 57 (Laser Notice No. 57).

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT RISK GROUP 2, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed.1.0. For more information see Laser Notice No. 57, dated May 8, 2019.

IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級

IEC 60825-1:2014 1类激光产品RG2危险等级

1. Kaip ir bet kurio ryškaus šviesos šaltinio atveju, nežiūrėkite į tiesioginį spindulį, RG2 IEC 62471-5:2015.
2. Šis projektorius yra 1 klasės IEC/EN 60825-1:2014 lazerinis gaminys ir yra priskiriamas 2 rizikos grupei, atitinkantis IEC 62471-5:2015 reikalavimus.
3. Prižiūrėkite vaikus: nežiūrėkite į tiesioginį spindulį ir venkite naudoti optines priemones!
4. Įspėjama prižiūrėti vaikus ir niekada neleisti jiems žiūrėti į projektoriaus spindulį bet koku atstumu nuo projektoriaus.
5. Atkreipkite dėmesį, kad reikia būti atsargiems, kai projektoriaus nuotolinio valdymo pultu įjungiate projektorių, esant priešais projektoriaus objektyvą.
6. Vartotojas įspėjamas vengti naudoti optines priemones, tokias kaip, žiūronai ar teleskopai, esant spinduliui.
7. Įjungdami projektorių įsitikinkite, kad niekas projekcijos diapazone nežiūri į objektyvą.
8. Nelaikykite jokių daiktų (didnamojo stiklo ir pan.) projektoriaus šviesos kelyje. Šviesos kelias, projektuojamas iš objektyvo, yra platus, todėl bet kokie neįprasti daiktai, galintys nukreipti iš objektyvo išeinančią šviesą, gali sukelti nenumatytus padarinius, pvz.: gaisrą ar akių sužalojimus.
9. Atsargiai - naudojant valdiklius ar reguliavimus arba atliekant kitas procedūras, nei nurodyta čia, gali atsirasti pavojingas radiacijos poveikis.
10. Neatidarykite ir neišardykite projektoriaus, nes tai gali sukelti žalą dėl lazerio spinduliuotės poveikio.
11. Nežiūrėkite į spindulį, kai projektorius įjungtas. Ryški šviesa gali visam laikui pažeisti akis.

Nesilaikant kontrolės, reguliavimo ar naudojimo procedūrų, gali būti padaryta žala dėl lazerio spinduliuotės.

Lazerio pranešimas

IEC 60825-1:2014: 1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS – 2 RIZIKOS GRUPĖ.

Gaminys skirtas naudoti kaip plataus vartojimo lazerinis gaminys ir atitinka EN 50689:2021. 1 KLASĖS PLATAUS VARTOJIMO LAZERINIS GAMINYS

EN 50689:2021



Šis įrenginys sveria 30 kg, todėl jį turi kelti du žmonės, naudodami nešimo rankenas.

Transportuokite įrenginį vertikaliai, nustatę mažiausią aukštį.

Transportavimo metu užfiksuokite visus ratukus.

NEGULDYKITE įrenginio ant priekinės, galinės ar šoninių dalių.

Produkto apžvalga

„omiVista Mobii“ įrenginys yra nešiojamas ir sukurtas interaktyviam vaizdo projektavimui ant grindų arba stalo paviršiaus, kurie turėtų būti šviesios spalvos.

Daugiau informacijos apie įrenginio naudojimą jūsų aplinkoje arba scenarijuje rasite pateiktame vartotojo vadove.

Įrenginio išorės paviršius padengtas antibakterine danga.

Grindų arba transportavimo režimas

Projektoriaus būsenos indikatoriai

Nešimo rankenos




Užrakinami ratukai

Stalo režimas

Projektorius

Kamera

Elektrinis pakėlėjas

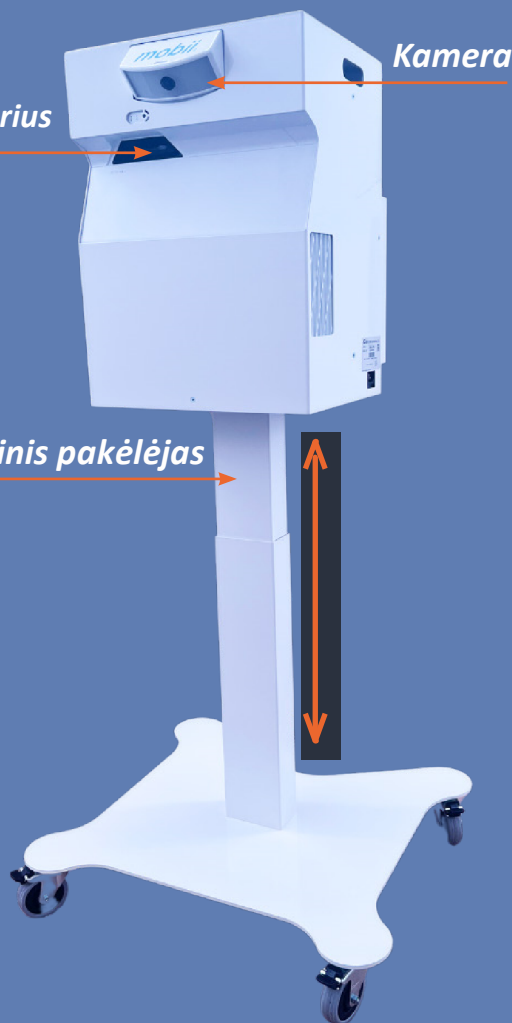


Komplekte yra:

- 📖 Produkto instrukcija
- 📖 Naudojimo instrukcija
- 📖 Belaidė klaviatūra
- 📖 Belaidis nuotolinio valdymo pultas
- 📖 IEC maitinimo kabelis
- 📖 Vinilo uždangalas



Susipažinkite su „omiVista Mobii“ valdymo elementais:

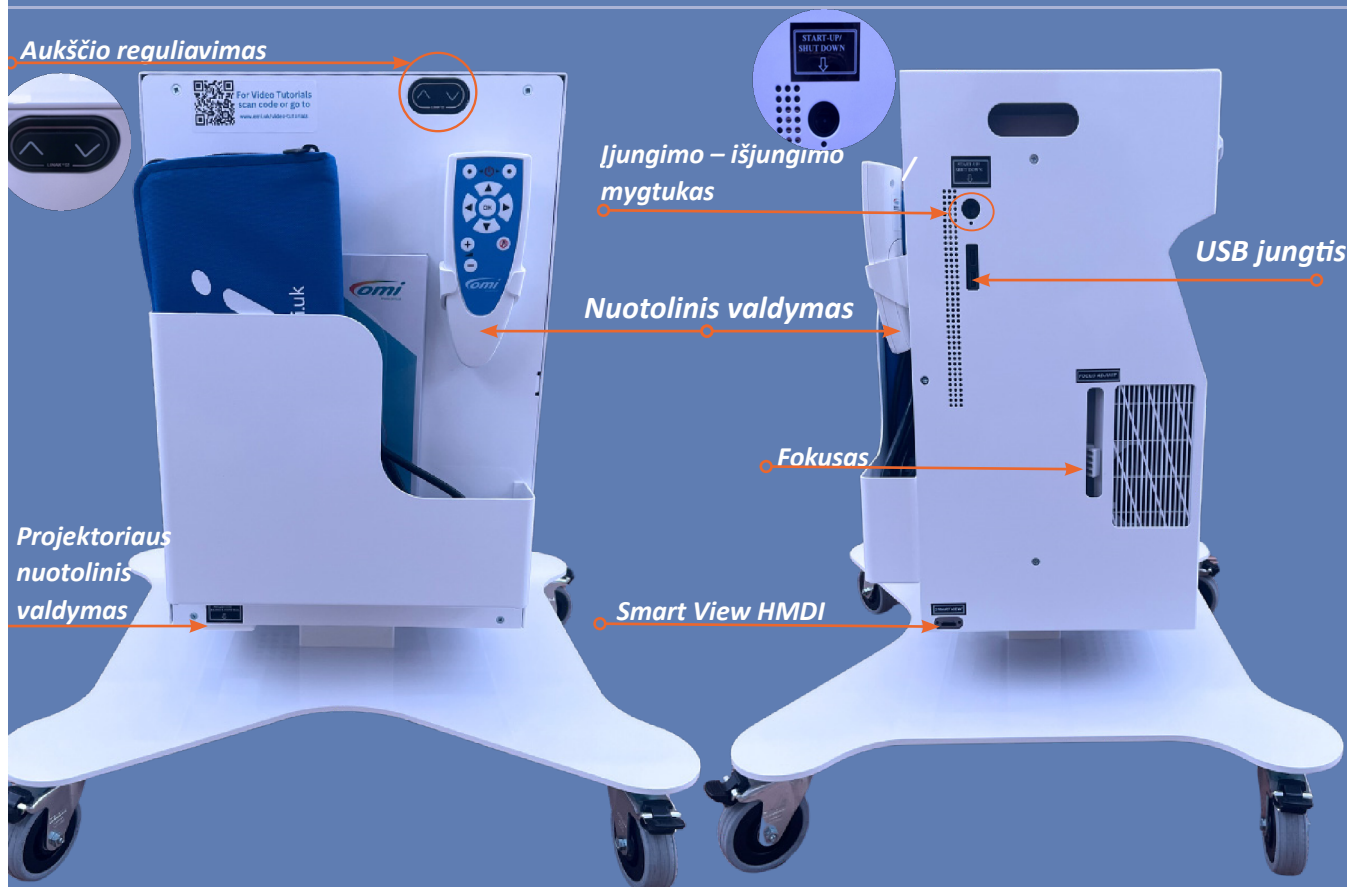

Smart View

„Smart View“ funkcija išplečia „Mobii V4“ funkcionalumą, nes leidžia lengvai prijungti išorinius įrenginius per HDMI prievadą. Vartotojai gali prijungti nešiojamuosius kompiuterius, planšetinius kompiuterius ir kitus HDMI suderinamus įrenginius, kad jų turinys būtų rodomas tiesiogiai per projektorį..

Siekiant didesnio universalumo, vartotojai gali naudoti adapterį, kad prijungtų mobiliuosius telefonus, taip lengvai dalindamiesi vaizdo įrašais, nuotraukomis ar programėlėmis didesniame, interaktyviame ekrane. „Smart View“ puikiai tinka grupės veiklai pagerinti, individualizuotiems medijos failams demonstruoti ar papildomoms pramogoms teikti..

Ši funkcija užtikrina, kad „Mobii V4“ prisitaiko prie įvairių vartotojų poreikių, tuo pačiu išlaikydamas patrauklią ir dinamišką patirtį. Atkreipkite dėmesį, kad šiai funkcijai atrakinti ir naudoti reikalinga papildoma licencija.




Projektoriaus būsenos indikatoriai

Projektoriaus būsenos indikatoriai yra tik informacinio pobūdžio.

Išsamus projektoriaus būsenos indikatorių aprašymas pateiktas 15 puslapyje.

(Nespauskite projektoriaus mygtukų, nebent to paprašytų techninės pagalbos specialistas).

Temp LED Lamp LED ON Įjungimas

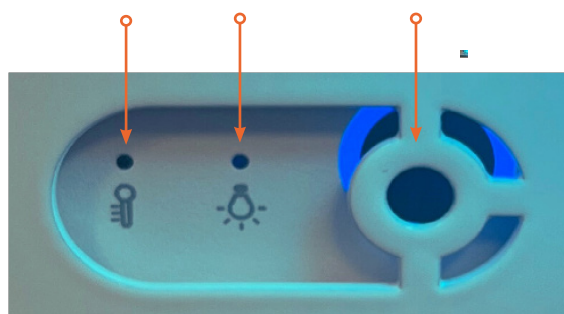

Sistemos valdymas

Nuotolinis valdymo pultas



Norėdami **įjungti sistemą**, naudokite du mygtukus, esančius viršuje. **Paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį mygtuką, tada paspauskite dešinįjį mygtuką**, vis dar laikydami nuspaudę kairįjį mygtuką. Atleiskite abu mygtukus.

Naudokite belaidžio nuotolinio valdymo pulto rodykles „**AUKŠTYN**“, „**ŽEMYN**“, „**KAIRĖN**“ ir „**DEŠINĖN**“, kad naršytumėte pagrindiniame meniu, o mygtuką „**OK**“ naudokite, kad pasirinktumėte arba sustabdytumėte programą arba pasirinktumėte automatinio paleidimo funkciją (jei yra).

Naudokite **interaktyvumo sustabdymo mygtuką**, kad užblokuotumėte interaktyvumą arba perkeltumėte sistemą į budėjimo režimą iš meniu ekrano. Daugiau informacijos rasite vartotojo vadove.

Naudokite **garsumo + ir – mygtukus**, kad reguliuotumėte garsą.

Belaidė klaviatūra

Belaidė klaviatūra skirta tik sistemos turiniui redaguoti, ją turi naudoti apmokytas operatorius arba mūsų platintojo / partnerio inžinierius arba OM Interactive inžinierius, ir ji turi būti laikoma atokiau nuo įrenginio, kad prireikus būtų galima ją paimti. Užtikrinkite, kad ji būtų išjungta, kai nenaudojama, o baterijos išimtos, jei laikoma ilgą laiką.

Kairysis pelės mygtukas

Įjungimas/išjungimas



Pelė su kairiuoju ir dešiniu mygtukais



USB imtuvas

Nuotolinio valdymo pultas ir klaviatūra yra prijungti prie mažo USB imtuvo, kuris yra „omiVista Mobii“ įrenginio apačioje. Jie yra suporuoti arba prijungti prie USB naudojant omiVista Mobii įrenginyje esančią programinę įrangą. Norint pakeisti nuotolinio valdymo pultą arba klaviatūrą, turėsite naudoti „Logitech“ „unifying“ programinę įrangą, kad suporuotumėte įrenginį.

Darbo pradžia


Paleidimas

Įsitikinkite, kad įrenginys yra šalia skaidraus stalo paviršiaus arba yra žemiausioje padėtyje, paruoštas projektuoti ant grindų, o ratukai yra užrakinti. Tada prijunkite IEC maitinimo laidą. Norėdami įjungti sistemą, naudokite du mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pulto viršuje. Paspauskite ir palaikykite kairįjį mygtuką, tada paspauskite dešinįjį mygtuką laikydami nuspaudę kairįjį mygtuką, tada atleiskite abu mygtukus. Arba paspauskite paleidimo mygtuką.

Raudona pulsuojanči šviesa įrenginio priekyje turėtų pradėti pulsuoti mėlynai.

Nenaudokite projektoriaus maitinimo mygtuko, sistema automatiškai įjungs ir išjungs projektorius.

Sistema įsijungs, o vaizdas pasirodys maždaug po 30 sekundžių.

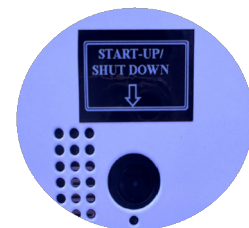

Išjungimas

Norėdami išjungti sistemą, kai baigsite ją naudoti, vieną kartą trumpai paspauskite paleidimo / išjungimo mygtuką arba naudokite nuotolinio valdymo pultą. Naudokite du mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pulto viršuje. Paspauskite ir palaikykite kairįjį mygtuką, tada paspauskite dešinįjį mygtuką laikydami nuspaudę kairįjį mygtuką, tada atleiskite abu mygtukus. Palaukite kelias minutes, kol sistema atvės, prieš išimdami maitinimo laidą. Sandėliuokite įrenginį su vinilo už dangalu.

Aukščio reguliavimas

Sureguliuokite „omiVista Mobii“ įrenginio aukštį, kad vaizdas užpildytų stalo paviršių, naudodami rodyklių aukštyn / žemyn mygtukus įrenginio gale, arba palikite įrenginį žemiausioje padėtyje, kad būtų galima projekcija ant grindų.



Fokusavimo reguliavimas

Jei dalis projektuojamo vaizdo atrodo neryškus, viršutinėje įrenginio dalyje yra reguliatorius, kurį sukant į kairę ir į dešinę galima koreguoti vaizdą. Tai gali būti reikalinga, kai keičiasi projektuojamo vaizdo dydis.



Pagrindinis ekranas

Kai sistema baigs paleidimo seką, pagrindiniame ekrane bus rodomos aplanko ir programų piktogramos, kurias galima pasirinkti naudojant rankinį nuotolinio valdymo pultą, pateiktą kartu su sistema, naudojant **mygtukus AUKŠTYN/ŽEMYN/KAIRĖN/DEŠINĖN ir „OK“**.




Taikomosios programos

Jūsų sistema bus komplektuojama su keliomis pavyzdinėmis programomis arba su pilnu programų rinkiniu, priklausomai nuo užsakytos versijos. Bus pridėtas „Vartotojo vadovas“, kuriame pateikiama daugiau informacijos apie turinį, jo naudojimą ir redagavimą (jei turite redaguojamą arba „+“ sistemos versiją).

Patikrinkite, ar pavyzdinės programos veikia tinkamai, išbandydami bent po vieną iš kiekvieno tipo efektų. Tai yra šie efektai: „Scatter“, „Splat“, „Quiz“, „Wipe“, „Water“, „Zones“, „Ball Games“ ir kt.

Sistemos nustatymai

Norėdami patekti į sistemos nustatymus arba programos redagavimo sritį (jei turite redaguojamą arba „+“ sistemos versiją), turėsite turėti belaidę sistemos klaviatūrą. Įjunkite ją ir paspauskite CTRL+M, tada viršutiniame pagrindinio lango kampe atsiras meniu juosta, kurioje matysite mygtukus, leidžiančius redaguoti, kurti naujas programas, importuoti programas, pervardyti dubliuotus elementus, perkelti arba ištrinti programas ar aplankus ir kt. Daugiau informacijos apie redagavimą rasite vartotojo vadove. Be to, turėsite prieigą prie sistemos nustatymų.

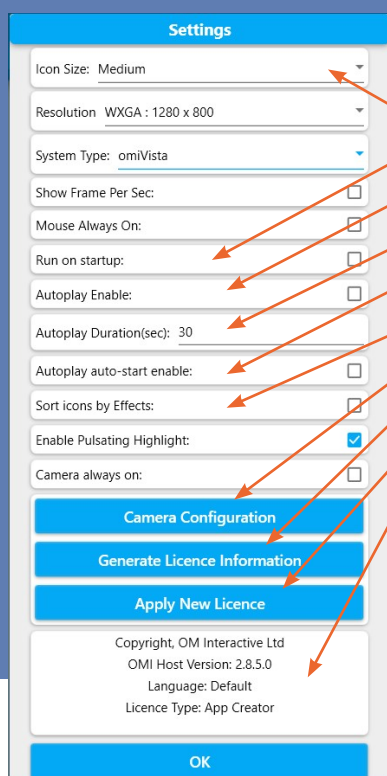

Sistemos nustatymai

Nustatymų meniu jūs galite:

- Pasirinkti programos miniatiūros arba aplanko piktogramos dydį.
- Nustatyti programinės įrangos automatinį paleidimą.
- Įjungti automatinį paleidimą.
- Nustatyti programos veikimo trukmę sekundėmis, kai įjungtas automatinis paleidimas.
- Nustatyti, kad automatinis paleidimas būtų įjungtas automatiškai, kai įjungiama sistema.
- Rūšiuoti piktogramas pagal efektą.
- Patikrinti kameros kalibravimo nustatymus.
- Sukurti licencijos informaciją.
- Taikyti naują licenciją.
- Peržiūrėti programinės įrangos versijos informaciją.

Išsami informacija apie minėtus elementus pateikiama toliau esančiuose skyriuose.

Sistemos nustatymai

Ikonių dydis: Galite pasirinkti pagrindinio ekrano piktogramų, kurios atvaizduoja jūsų aplanką ar programas, dydį.

Programinės įrangos automatinis paleidimas: ši funkcija užtikrina, kad „omiSurface“ programinė įranga paleis automatiškai, kai sistema bus įjungta.

Įjungti automatinį paleidimą: įjungus šią funkciją, automatinio paleidimo piktograma bus pridėta viršuje pagrindiniame ekrane, ir tada galėsite automatiškai paleisti visas programas iš aplanko, kuriame esate.


Norėdami naudoti šią funkciją, nuotolinio valdymo pultu pereikite prie piktogramos ir spustelėkite „OK“, kad pradėtumėte automatinį paleidimą. Piktograma pakeis spalvą į violetinę. Norėdami sustabdyti šią funkciją, spustelėkite „OK“, kad sustabdytumėte dabartinės programos veikimą, tada grįžkite prie automatinio paleidimo piktogramos ir spustelėkite „OK“, kad atšauktumėte.

Automatinio paleidimo trukmė: leidžia kontroliuoti, kiek laiko kiekviena veikla pasirinktame aplanke bus vykdoma, prieš automatiškai pereinant prie kitos programos.

Automatinio paleidimo įjungimas: leidžia nustatyti, kad automatinis paleidimas būtų įjungtas automatiškai paleidus programinę įrangą.


Piktogramų rūšiavimas pagal efektą: leidžia keisti veiklų rodymo tvarką pagal jų efektą, o ne abėcėlę.

Automatinis paleidimas įjungtas

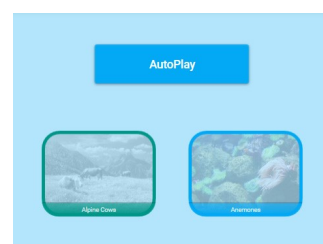

Kameros kalibravimas

Išbandę programas galite pastebėti, kad sistemai gali prireikti kai kurių jautrumo koregavimų. Visos sistemos yra išbandomos ir kalibruojamos mūsų gamykloje prieš išsiunčiant, tačiau skirtingos apšvietimo sąlygos gali pakeisti programos veikimo jautrumą, pavyzdžiui, jei į aplinką, kurioje naudojama sistema patenka daug dienos šviesos / saulės šviesos, tai gali sumažinti jautrumą, o tai gali reikšti, kad rankos judesiai per projektuojamą vaizdą gali netiksliai suaktyvinti sąveiką, tokiu atveju sistemos nustatymuose gali reikėti pakoreguoti jautrumą. Norėdami tai padaryti, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „OK“, kad grįžtumėte į pagrindinio meniu ekraną, tada vykdykite toliau pateiktas instrukcijas:

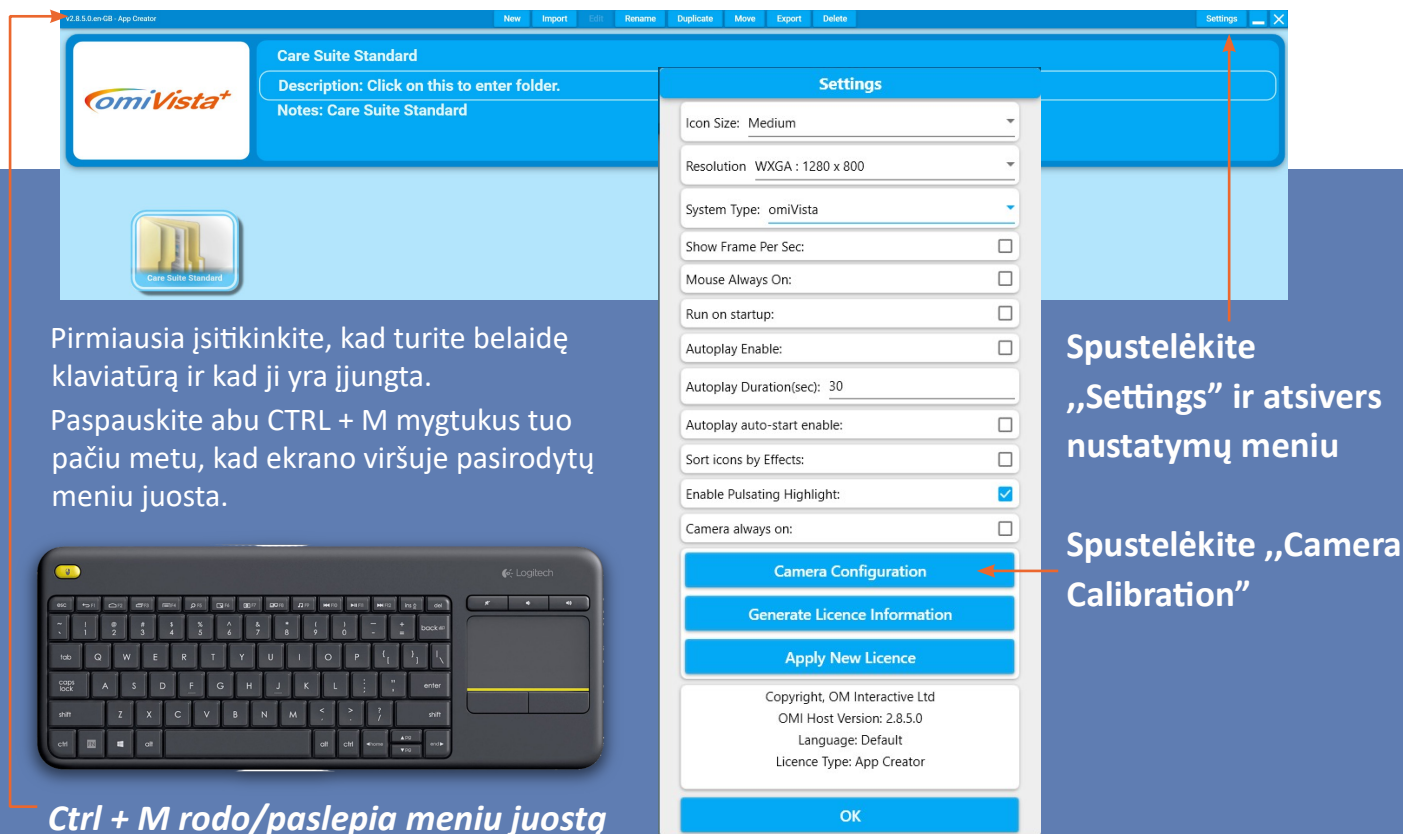

Pirmiausia įsitikinkite, kad turite belaidę klaviatūrą ir kad ji yra įjungta. Paspauskite abu CTRL + M mygtukus tuo pačiu metu, kad ekrano viršuje pasirodytų meniu juosta.

Spustelėkite „Settings“ ir atsivers nustatymų meniu

Spustelėkite „Camera Calibration“

Ctrl + M rodo/paslepia meniu juosta

Grindų kalibravimas:


V3 2021 „omiVista Mobii“ kameros nustatymus reikia kalibruoti esant šioms situacijoms: mažas grindų plotas, didelis grindų plotas, mažas stalas ir didelis stalas. Nustatykite omiVista Mobii į žemiausią aukščio nustatymą mažoms grindims. Įsitikinkite, kad keturi kalibravimo taškai apatiniame kairiajame lange yra nustatyti pagal projekcijos vaizdo kampus. Jei ne, juos galima reguliuoti naudojant pelės kilimėlį ir pelės mygtukus belaidės klaviatūros dešinėje pusėje. Baigę, spustelėkite mygtuką „Kalibruoti žemiausią tašką“ ir nustatykite žemiausią grindų dydžio kalibravimą. Pakelkite „omiVista Mobii“ aukštį, kol projekcija pasieks maždaug 2,5 metro plotį arba aukščio rodiklis parodys 20 cm, tada nustatykite kalibravimo taškus projekcijos kampuose, kaip ir anksčiau. Baigę, spustelėkite mygtuką „Kalibruoti aukščiausią tašką“. Tai nustatys kalibravimą aukščio diapazonui, kuriame sistema gali būti naudojama projekcijai ant grindų. Kalibravimas dinamiškai prisitaiko prie šio diapazono, kai nustatomi žemiausias ir aukščiausias taškai.

Stalo kalibravimas:

Pakelkite sistemą iki aukščio, kuriame ji bus naudojama ant stalo paviršiaus su nedideliu projekcijos plotu. Turėtumėte pamatyti, kad dabartinio režimo rodmuo pasikeičia iš grindų režimo į stalo režimą, o dabartinis aukštis bus didesnis nei 20 cm. Pakartokite aukščiau aprašytą procedūrą, nustatydami keturis kampinius taškus projekcijos kampuose, kad būtų nustatytas žemiausias taškas, ir būtinai spustelėkite mygtuką „Kalibruoti žemiausią tašką“.

Pakelkite įrenginį taip, kad projekcija užpildytų stalo paviršių, o vaizdas neišsikištų už kraštų, ir nustatykite naujus kampinius taškus. Patvirtinkite spustelėdami mygtuką „Kalibruoti aukščiausią tašką“.

Dabar jūsų sistema yra kalibruota naudoti ant grindų ir stalo, ir dinamiškai reguliuos režimą ir kalibravimo taškus pagal sistemos aukštį.

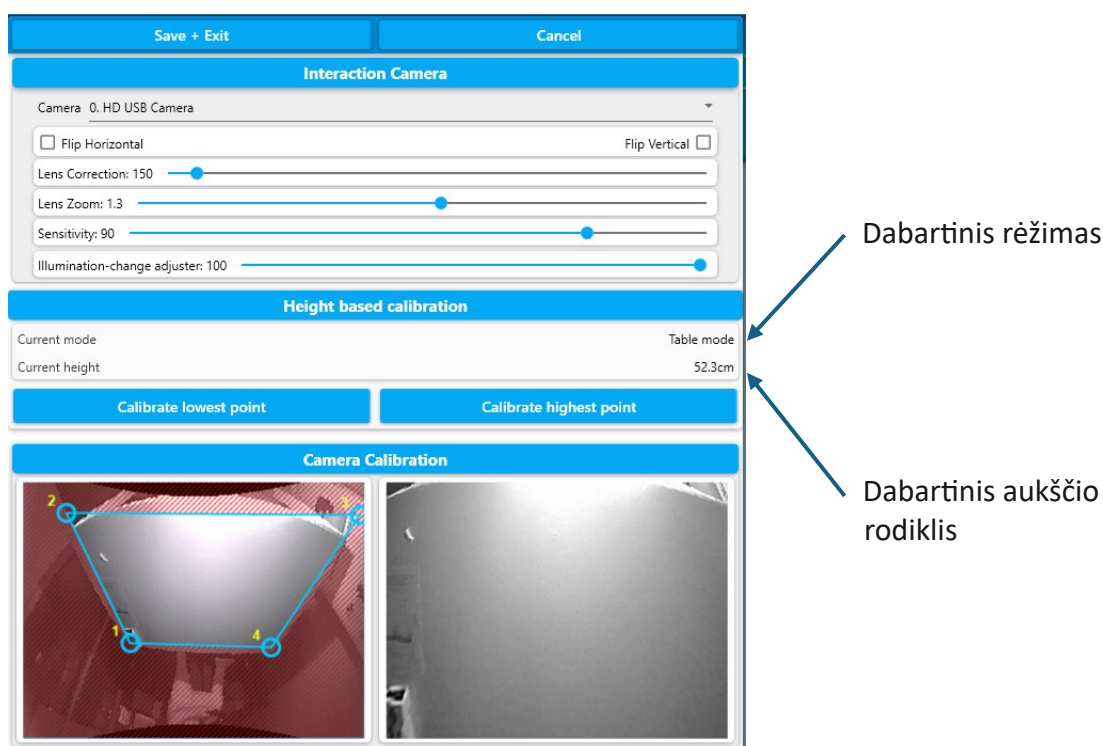

Projekcijos dydžiai:

Norėdami pasiekti optimalų našumą, rekomenduojame šiuos projekcijos dydžius:

Stalo projekcija nuo 100 iki 150 cm pločio.

Grindų projekcija nuo 200 iki 260 cm pločio.

Informacija apie licenciją

Sukurti informaciją apie licenciją: Visos sistemos bus pristatytos jau su licencija, todėl jums neturėtų būti būtina naudoti šią funkciją, nebent OMi nurodytų kitaip. Šis mygtukas leidžia jums prašyti sistemos licencijos ir sukuria licencijos prašymo failą, kurį turėsite nusiųsti el. pašto adresu - support@omi.uk.

Taikyti naują licenciją: Visos sistemos bus pristatytos jau su licencija, todėl jums neturėtų reikėti naudotis šia funkcija, nebent Omi nurodytų kitaip. Šis mygtukas leidžia jums taikyti naują licenciją, kurią jums atsiųs OMi. Jei nauja licencija jums buvo išsiųsta el. paštu, turėtumėte perkelti failą į USB atmintinę, kuri turi būti įjungta į USB prievadą jūsų „omiVista Mobii“ įrenginio šone. Spustelėkite mygtuką „Taikyti naują licenciją“ ir pereikite į aplanką jūsų atmintinėje, į kurį nukopijavote failą. Pasirinkite failą ir spustelėkite „OK“, kad pritaikytumėte naują licenciją.

Nuotolinio valdymo pulto ir klaviatūros suporavimas

Apžvalga



1. Naršymo mygtukai
2. Garsumo mygtukai
3. Veiksmų sustabdymo mygtukas
4. Baterijų skyrius

Poravimas

OmiVista sistemos nustatymas:

1. Naudodami išorinę klaviatūrą, paspauskite **CTR + M**, tada pagrindinio ekrano viršuje turėtų pasirodyti įrankių juosta.
2. Norėdami išeiti iš programos, spustelėkite mygtuką „**CLOSE**“ (Uždaryti).
3. Spustelėkite „Windows“ paleidimo piktogramą ekrano kairiajame apatiniame kampe ir pradėkite rašyti „Logitech“. Tada turėtumėte pamatyti parinktį „Logitech Unifying Software“.
4. Pasirinkite „**Advanced**“ (Išplėstinis).
5. Kairiajame lange turėtumėte matyti „Unifying“ imtuvą (USB raktą). Spustelėkite „**Pair a new device**“ (Prijungti naują įrenginį).
6. Nuimkite baltą nuotolinio valdymo pulto galinį dangtelį.
7. Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto galinės dalies ir įdėkite jas iš naujo.
8. Nuotolinio valdymo pultas turėtų pasirodyti įrenginių sąrašė.

Klaviatūros poravimas

Klaviatūros suporavimas su „omiVista“ sistema.

„omiVista“ sistemos nustatymas:

1. Naudodami išorinę klaviatūrą, paspauskite „**CTR + M**“, o pagrindiniame ekrane, viršuje, turėtų atsirasti įrankių juosta.
2. Spustelėkite mygtuką „**CLOSE**“ (Uždaryti), kad išeitumėte iš programinės įrangos.
3. Spustelėkite „Windows“ paleidimo piktogramą ekrano kairiajame apatiniame kampe ir pradėkite rašyti „Logitech“, tada turėtumėte pamatyti parinktį „Logitech Unifying Software“.
4. Pasirinkite „**Advanced**“ (Išplėstinis).
5. Kairiajame lange turėtumėte pamatyti unifikuojantį imtuvą (USB raktą). Spustelėkite „**Pair a new device**“ (Sujungti naują įrenginį).
6. Išjunkite ir vėl įjunkite klaviatūros maitinimo jungiklį.
7. Klaviatūra K400 plus turėtų pasirodyti įrenginių sąrašė.



Ctrl M rodyti/paslėpti meniu juosta

Valymas ir dezinfekcija

Pagrindinis įrenginys ir pagrindo plokštė

Pagrindinio bloko korpusas ir pagrindo plokštė yra padengti antimikrobine milteline danga. Žiūrėkite išsamią informaciją žemiau*. Pagrindinį bloką, pagrindo plokštę ir elektrinį pakėlimo mechanizmą taip pat galima valyti naudojant Clinelli® ar panašias universalias servetėles. Įsitikinkite, kad pagrindinis blokas yra išjungtas, atvėsęs ir kad kištukas yra ištrauktas iš elektros lizdo ir iš bloko galinės dalies. Būkite atsargūs, kad servetėlės nebūtų pernelyg drėgnos ir įsitikinkite, kad nešlapintumėte jokios įrenginio angos ar ventiliacijos lizdo.

Prieš vėl prijungdami įrenginį prie elektros tinklo, palaukite, kol drėgmė išgaruos, ir nuvalykite kameros ir projektoriaus lęšius minkštu, švari audiniu be pūkelių, kad pašalintumėte bet kokias servetėlės paliktas žymes.



Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pultą taip pat galite valyti laikydamiesi tų pačių atsargumo priemonių, kaip nurodyta aukščiau.

Belaidė klaviatūra

Nenaudokite drėgnų servetėlių belaidės klaviatūros valymui, jei jos yra pernelyg šlapios. Pirmiausia išimkite baterijas, tada rekomenduojame išgręžti servetėles, kad jos būtų tik drėgnos, kitaip klaviatūra po valymo gali tinkamai neveikti. Švelniai nuvalykite klavišus ir kitas klaviatūros dalis ir leiskite visiškai išdžiūti prieš vėl įdedant baterijas.

Antimikrobinė danga

Antibakterinis poveikis: specialiai sukurta danga su papildoma veiksminga antimikrobine medžiaga, kuri naikina daugumą bakterijų rūšių ir neleidžia daugintis kenksmingoms bakterijoms, grybams ir pelėsiui.

Hygienilac per 24 valandas pasiekė >Log 3 (99,9 %) naikinimo lygį prieš šias bakterijas:

- 9 Staphylococcus aureus meticilinui atspari rūšis (MRSA)
- 9 Listeria monocytogenes
- 9 Clostridium difficile Escherichia coli
- 9 Staphylococcus aureus
- 9 Salmonella enteritidis
- 9 Klebsiella pneumonia
- 9 Aspergillus niger
- 9 Pseudomonas aeruginosa
- 9 Penicillium purpurogenum
- 9 Bacillus cereus
- 9 Saccharmyces cerevisiaeThermasets'

Thermasets TLAB antibakterinė miltelinė danga, kurioje yra Hygienilac, taip pat buvo išbandyta nepriklausomose laboratorijose pagal BS EN 13697 (paviršiaus testas) dėl Clostridium difficile sporų ir atitiko Britanijos standarto reikalavimus su >Log 3 (1,0x10³) naikinimo koeficientu.

Specifikacijos

Projekcijos specifikacijos

Stalo projekcija nuo 100 iki 150 cm pločio

Grindų projekcija nuo 200 iki 260 cm pločio

Energijos specifikacijos

Įtampa: 100 – 240 VAC

Dažnis: 50 – 60 Hz

Budėjimo režimo galia: 7.5 W esant 240 V 50 Hz

Ekologinė galia: 165 W esant 240 V 50Hz

Įprasta galia: 176 W esant 240 V 50Hz

Maksimali galia: 185 W esant 240V 50Hz

I klasė (PAT Testas kaip IT įrangai)

Projektoriaus šviesos šaltinis

DuraCore Lazeris, Lazerio tarnavimo laikas: 30,000 hr

Svoris ir matmenys

Plotis: 58 cm / 23"

Gylis: 53 cm / 21"

Aukštis: 65 cm / 25.5" 131 cm / 51.5" ištiestas

Svoris: 28 KG / 61.7 Lbs

„omiVista Mobii“ suprojektavo ir pagamino **OM Interactive** Anglijoje.



OM Interactive LTD

17 Avebury Court, Mark Road, Hemel Hempstead Hertfordshire, HP2 7TA, England.

Techninė pagalba:

JK klientams Tel: **01442 215555** arba el.p. **support@omi.uk**

Tarptautinius klientus aptarnauja regioniniai tiekėjai