

Produkta rokasgrāmata

omiVista Mobii V4

Uzstādīšana, iestatīšana, apkope un atbalsts



omiVista
mobii

Paldies, ka iegādājāties šo OM Interactive LTD produktu.

Pirms šīs sistēmas lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabāiet tos turpmākai uzziņai

Saturs

Vispirms izlasiet šo	3
Svarīgi drošības norādījumi galvenajai ierīcei	3
Informācija par lāzera starojuma drošību	4
Produkta pārskats	6
Sistēmas komplektācijā ietilpst:	6
Iepazīšanās ar omiVista Mobii vadības ierīcēm:	7
Viedskats	7
Projektora statusa indikatori	7
Sistēmas vadība	8
Bezvadu tālvadības pults	8
Bezvadu tastatūra	8
USB uztvērējs	8
Darba sākšana	9
Startēšana	9
Izslēgšana	9
Augstuma regulēšana	9
Fokusa regulēšana	9
Galvenais ekrāns	9
Lietojumprogrammas	10
Sistēmas iestatīšana	10
Sistēma iestatījumu informācija	10
Kameras kalibrēšana	11
Grīdas kalibrēšana	11
Galda kalibrēšana	12
Tālvadības pults un tastatūras savienošana pārī	13
Tīrīšana un infekciju kontrole	14
Specifikācija	15
Projekcijas	
specifikācijas	15
Barošanas	
specifikācijas	15
Projektora lampas kalpošanas laiks	15
Svars un izmēri	15

Izlasiet šo vispirms

Drošības informācija

	The lightning flash with arrow head within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DANGEROUS HIGH VOLTAGES ARE PRESENT INSIDE THE ENCLOSURE. DO NOT OPEN THE CABINET. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL ONLY.

Svarīgi drošības norādījumi galvenajai ierīcei

- Iekšpusē nav lietotājam apkalpojamu detaļu
- Neizjauciet un nemēģiniet apkalpot šo ierīci. Vērsieties tikai pie kvalificēta, apmācīta personāla, vietējā izplatītāja/izplatītāja vai OM Interactive Ltd.
- Šis nav bērniem paredzēts produkts, un to nav paredzēts lietot personām, kas jaunākas par 18 gadiem, vai personām, kuras nav saņēmušas atbilstošu apmācību.
- Neceliet un nenolaidiet šo ierīci, izmantojot pacelšanas/nolaišanas vadības ierīces, ja pastāv risks, ka ierīce varētu saskarties ar galda virsmu vai projekcijas virsmu, vai ja pastāv risks iesprūst ķermeņa daļas, īpaši pirkstus, starp ierīci un virsmu, uz kuras tiek projicēts attēls, vai jebkuru citu tuvumā esošu objektu.
- Neapsedziet produktu lietošanas laikā; izmantojiet komplektā iekļauto vinila aizsargapvalku tikai tad, kad ierīce ir izslēgta un tai ir ļauts atdzist vismaz 5 minūtes.
un strāvas kabelis ir noņemts un droši noglabāts kabatā ierīces aizmugurē.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Lai nodrošinātu projektora drošu darbību un pasargātu sistēmu no pārkaršanas, ieteicams ierīci lietot vietā, kas neaizsedz ventilāciju. Piemēram, nelietojiet ierīci blakus sienām, aizkariem vai drapējīgām, kas var aizsegt vai aizsegt sistēmas izplūdes vai gaisa ieplūdes atveres.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces augšpusē.
- Nelietojiet ierīci ūdens vai mitruma tuvumā. Lai samazinātu ugunsgrēka un/vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet ierīci lietum vai mitrumam. • Nelietojiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru, sildītāju, plīšu vai citu ierīču, kas izdala siltumu, tuvumā.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus/aksesuārus. • Nelietojiet ierīci, ja tā ir fiziski bojāta vai tikusi ļaunprātīgi izmantota. Fiziski bojājumi/ļāunprātīga izmantošana būtu (bet ne tikai):
 9. Vienība ir nomesta.
 - 9 Strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta.
 - 9 Uz ierīces ir uzlijis šķidrums.
 - 9 Ierīce ir bijusi pakļauta lietum vai mitrumam.
 - 9 Kaut kas ir iekritis ierīcē vai iekšpusē kaut kas ir vaļīgs.

Informācija par lāzera starojuma drošību

Šis produkts ir klasificēts kā 1. KLASĒS LĀZERA PRODUKTS – 2. RISKĀ GRUPA saskaņā ar IEC60825-1: 2014 un atbilst arī 21 CFR 1040.10 un 1040.11 prasībām kā 2. riska grupa, LIP (lāzera apgaismots projektor), kā definēts IEC 62471-5:Ed. 1.0. Plašāku informāciju skatiet Lāzera paziņojumā Nr. 57, kas datēts ar 2019. gada 8. maiju.

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT RISK GROUP 2, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed.1.0. For more information see Laser Notice No. 57, dated May 8, 2019.

IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級

IEC 60825-1:2014 1类激光产品RG2危险等级

- Tāpat kā ar jebkuru spilgtu gaismas avotu, neskatieties tiešā starā, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Šis projektor ir 1. klases lāzera izstrādājums saskaņā ar IEC/EN 60825-1:2014 un 2. riska grupa ar prasībām, kas noteiktas IEC 62471-5:2015.
- Uzraugiet bērnus: neskatieties un neizmantojiet optiskos palīg līdzekļus!
- Tiek brīdināts uzraudzīt bērnus un nekad neļaut viņiem skatīties projektor starā.
attālumā no projektorā.
- Tiek norādīts, ka, lietojot projektor tālvadības pulti projektor ieslēgšanai, jāievēro piesardzība, atrodoties projekcijas objektīva priekšpusē.
- Lietotājam tiek sniegts brīdinājums izvairīties no optisko palīg līdzekļu, piemēram, binokļu vai teleskopu, lietošanas ierīces iekšpusē. staru.
- Ieslēdzot projektoru, pārliecinieties, vai projekcijas diapazonā neviens neskatās uz objektīvu.
- Turiet jebkādas priekšmetus (piemēram, palielināmo stiklu) ārpus projektor gaismas ceļa. Gaismas ceļš ir
No lēcas projicētais starojums ir plašs, tāpēc jebkādi neparasti objekti, kas var novirzīt no lēcas izstaroto gaismu,
var izraisīt neparedzamas sekas, piemēram, ugunsgrēku vai acu traumas.
- Uzmanību – vadības ierīču vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana, kas nav norādītas šeit
var izraisīt bīstamu starojuma iedarbību.
- Neatveriet un neizjauciet projektoru, jo tas var sabojāt lāzera starojumu.
- Neskatieties starā, kad projektor ir ieslēgts. Spilgtā gaisma var izraisīt neatgriezeniskus acu bojājumus.

Vadības, regulēšanas vai ekspluatācijas procedūru neievērošana var radīt bojājumus lāzera starojuma iedarbības dēļ.

Paziņojums par lāzeru

IEC 60825-1:2014: 1. KLASĒS LĀZERA PRODUKTS – 2. RISKĀ GRUPA.

Produkta paredzētais lietojums ir patērētāja lāzera produkts, un tas atbilst standartam EN 50689:2021. 1. KLASĒS PATĒRĒTĀJU LĀZERA PRODUKTS

EN 50689:2021



Šī ierīce sver 30 kg, un tā jāceļ diviem cilvēkiem, izmantojot pārnēsāšanas rokturus.

Pārvadājiet ierīci vertikāli, iestatot zemāko augstumu, un transportēšanas laikā nofiksējiet visus riteņus.

NEGULDIET uz priekšpuses, muguras vai sāniem

Produkta pārskats

OmiVista Mobii ierīce ir pārnēsājama un ir izstrādāta, lai nodrošinātu interaktīvu projekciju uz grīdas virsmas vai galda virsmas, abām virsmām jābūt gaišā krāsā.

Sīkāku informāciju par ierīces lietošanu jūsu iestatījumos vai situācijā skatiet pievienotajā lietotāja rokasgrāmatā .

Ierīces ārējai apdarei ir antibakteriāls pārklājums.

Grīdas vai transporta veids



Tabulas režīms




Sistēmā iekļauts:

- 9 Produkta rokasgrāmata
- 9 Lietotāja rokasgrāmata
- 9 Bezvadu tastatūra
- 9 Bezvadu tālvadības pults
- 9 IEC barošanas kabelis
- 9 Vinila vāks



Iepazīšanās ar omiVista Mobii vadības ierīcēm:

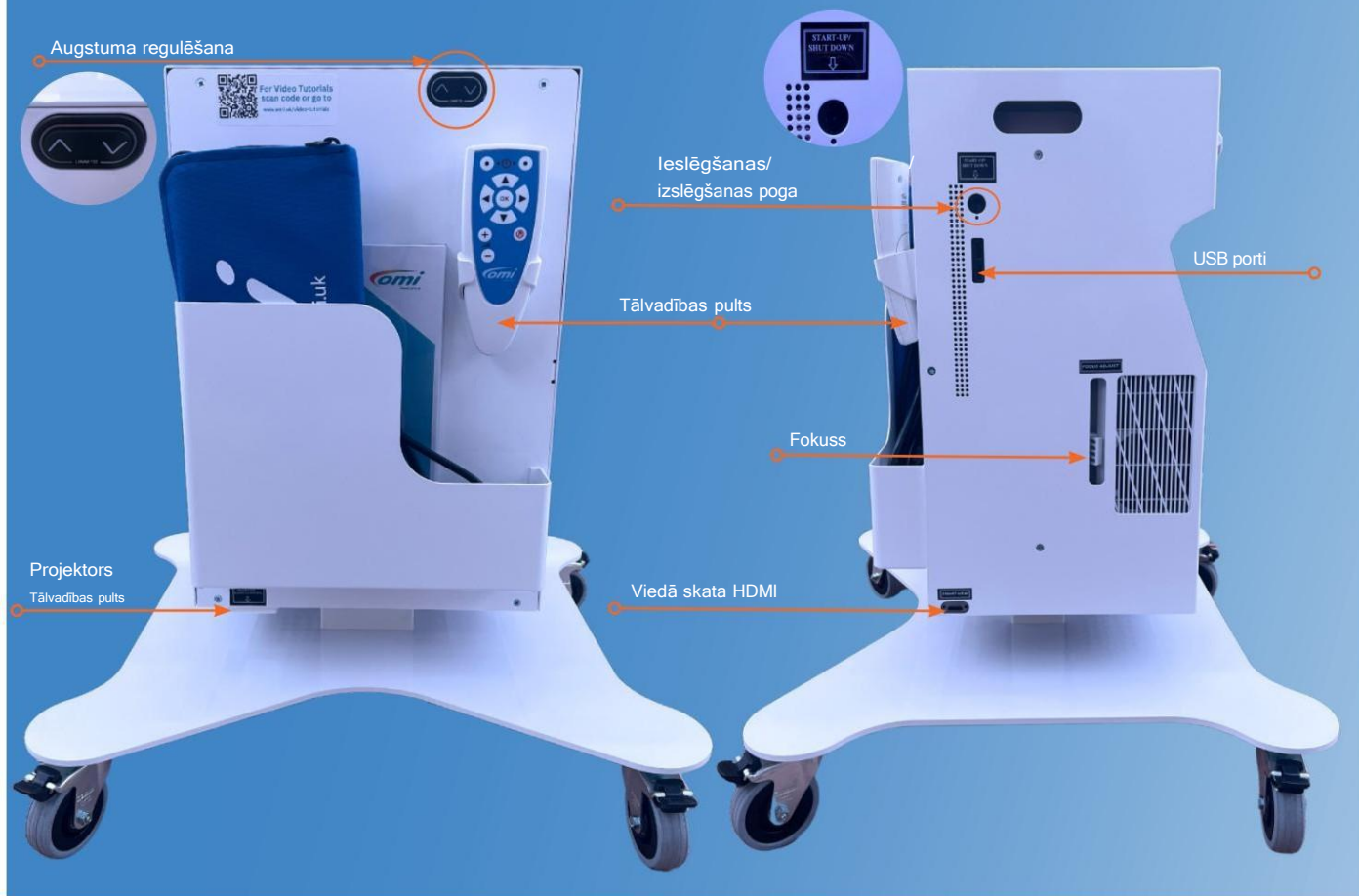

Viedskats

Funkcija Smart View paplašina Mobii V4 funkcionalitāti, nodrošinot netraucētu savienojumu ar ārējām ierīcēm, izmantojot HDMI portu. Lietotāji var pievienot klēpjdatorus, planšetdatorus un citas ar HDMI saderīgas ierīces, lai saturu parādītu tieši projektorā.

Lai nodrošinātu papildu daudzpusību, lietotāji var izmantot adapteri mobilo tālrunu pievienošanai, tādējādi atvieglojot video, fotoattēlu vai lietotņu kopīgošanu uz lielākas, interaktīvās virsmas. Smart View ir ideāli piemērots grupu aktivitāšu uzlabošanai, pielāgotu multivides failu demonstrēšanai vai papildu izklaides iespēju nodrošināšanai.

Šī funkcija nodrošina, ka Mobii V4 pielāgojas dažādām lietotāju vajadzībām, vienlaikus saglabājot saistošo un dinamisko pieredzi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs funkcijas atbloķēšanai un lietošanai ir nepieciešama papildu licence.




Projektorā statusa indikatori

Projektorā statusa indikatori ir paredzēti tikai indikācijai. Pilns projektorā statusa indikatoru skaidrojums ir atrodams 15. lappusē.

(Nespiediet projektorā pogas, ja vien to nelūdz atbalsta tehniķis).

Temperatūras LED lampa LED ieslēgšanas slēdzis

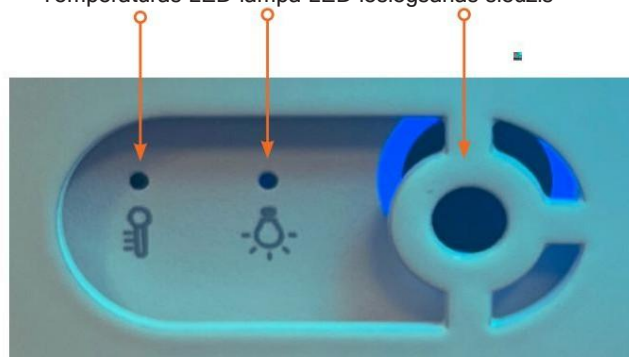

Sistēmas vadība

Bezvadu tālvadības pults



Lai ieslēgtu sistēmu, izmantojiet divas pogas, kas atrodas tālvadības pults augšpusē. Nospiediet un turiet kreiso pogu un pēc tam nospiediet labo pogu, vienlaikus turot nospiestu kreiso pogu. Atlaidiet abas pogas.

Lai pārvietotos pa galveno izvēlni, izmantojiet bezvadu tālvadības pults AUGŠUPVĒRSTO, LEJUPVĒRSTO, KREISI UN LABI VĒRSTOS BULTIŅAS, un pogu Labi, lai atlasītu vai apturētu lietojumprogrammu vai atlasītu automātiskās atskaņošanas funkciju (ja pieejama).

Izmantojiet interaktivitātes apturēšanas pogu, lai bloķētu interaktivitāti vai pārslēgtu sistēmu gaidstāves režīmā no izvēlnes ekrāna.

Sīkāku informāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

Lai regulētu skaņu, izmantojiet skaļuma + un - pogas.

Bezvadu tastatūra

Bezvadu tastatūra ir paredzēta tikai sistēmas satura rediģēšanai, ko veic apmācīts operators, vai apkopei, ko veic kāds no mūsu izplatītāju/partneru inženieriem vai OM Interactive inženieris, un tā jāuzglabā atsevišķi no ierīces, lai to varētu izņemt nepieciešamības gadījumā. Pārliecinieties, ka tā ir izslēgta, kad netiek lietota, un ka ilgstošai uzglabāšanai ir izņemtas baterijas.

Kreisā peles poga

Ieslēgšana/izslēgšana



Peles paliktnis ar kreiso un labo klikšķināšanas pogu

USB uztvērējs

Tālvadības pults un tastatūra ir savienotas ar nelielu USB uztvērēju, kas atrodas omiVista Mobii ierīces apakšpusē. Tās tiek savienotas pārī vai pievienotas USB, izmantojot programmatūru, kas ir iekļauta omiVista Mobii ierīcē. Ja būs jānomaina tālvadības pults vai tastatūra, jebkuras ierīces savienošanai pārī būs jāizmanto Logitech "unifying" programmatūra.

Darba sākšana

Startēšana

Pārliecinieties, vai ierīce atrodas blakus brīvai galda virsmai vai ir zemākajā pozīcijā, gatava projicēšanai uz grīdas, un vai ritentiņi ir nofiksēti. Pēc tam pievienojiet IEC barošanas kabeli.

Lai ieslēgtu sistēmu, izmantojiet divas pogas, kas atrodas tālvadības pults augšpusē.

Nospiediet un turiet kreiso pogu un pēc tam nospiediet labo pogu, joprojām turot nospiestu kreiso pogu, pēc tam atlaidiet abas pogas. Varat arī nospiegt ieslēgšanas pogu.

Sarkanajai pulsējošajai gaismai ierīces priekšpusē jāsāk pulsēt zilā krāsā.

Neizmantojiet projektorā ieslēgšanas/izslēgšanas pogu; sistēma projektoru ieslēgs un izslēgs automātiski.

Sistēma startēsies, un attēls sāks parādīties pēc aptuveni 30 sekundēm.



Izslēgšana

Lai izslēgtu sistēmu pēc tās lietošanas beigām, vienreiz īsi nospiediet pogu ieslēgšana/izslēgšana vai izmantojiet tālvadības pulti. Izmantojiet divas pogas, kas atrodas tālvadības pults augšpusē. Nospiediet un turiet kreiso pogu, pēc tam nospiediet labo pogu, joprojām turot nospiestu kreiso pogu, un pēc tam atlaidiet abas pogas. Pirms strāvas vada atvienošanas un uzglabāšanas ar uzliktu vinila aizsargapvalku, pagaidiet dažas minūtes, lai sistēma atdzistu.

Augstuma regulēšana

Pielāgojiet omiVista Mobii ierīces augstumu tā, lai attēls aizpildītu galda virsmu, izmantojot ierīces aizmugurē esošās augšupvērstās/lejupvērstās bultiņas, vai atstājiet ierīci zemākajā pozīcijā projicēšanai uz grīdas.



Fokusa regulēšana

Ja daļa projicētā attēla izskatās neasa, ierīces augšpusē ir regulēšanas mehānisms, kas rotē pa kreisi un pa labi, lai labotu attēlu. Tas var būt nepieciešams, mainoties projicētā attēla izmēram.



Galvenais ekrāns

Kad sistēma ir pabeigusi startēšanas secību, tiks parādīts galvenais ekrāns, kurā būs redzamas mapju un lietojumprogrammu ikonas, kuras var atlasīt, izmantojot sistēmas komplektācijā iekļauto rokas tālvadības pulti, izmantojot pogas AUGŠUP/LEJUP/PA KREISI/PA LABI un OK.



Pieteikumi

Jūsu sistēma tiks piegādāta komplektā ar dažām parauga lietojumprogrammām vai pilnu komplektu atkarībā no pasūtītā satura komplekta versijas. Būs pieejama "Lietotāja rokasgrāmata", kurā sniegta plašāka informācija par saturu, tā lietošanu un rediģēšanu (ja jums ir rediģējama vai "+" sistēmas versija).

Lūdzu, pārbaudiet parauga lietojumprogrammu pareizo funkcionalitāti, izmēģinot vismaz vienu no katra atšķirīgā efekta.

Tie ietver sekojošo: "Izkaisīt", "Plāksīt", "Viktorīna", "Noslaucīt", "Ūdens", "Zonas", Bumbas spēles utt.

Sistēmas iestatīšana

Lai piekļūtu sistēmas iestatījumiem vai lietojumprogrammu rediģēšanas apgabalam (ja jums ir rediģējama vai "+" sistēmas versija), jums būs nepieciešama sistēmas bezvadu tastatūra. Ieslēdziet to un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+M.

Pēc tam ierīce galvenā loga augšdaļā parādīs izvēlņu joslu, kur redzēsiet pogas rediģēšanai, lai izveidotu jaunas, importētu lietojumprogrammas, pārdēvētu dublikātus, pārvietotu vai dzēstu lietojumprogrammas vai mapes utt. Plašāku informāciju par rediģēšanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

Turklāt jums būs piekļuve sistēmas iestatījumiem.

The screenshot shows a 'Settings' window with the following elements:

- Icon Size:** Medium (dropdown menu)
- Resolution:** WXGA : 1280 x 800 (dropdown menu)
- System Type:** omiVista (dropdown menu)
- Show Frame Per Sec:** (checkbox, unchecked)
- Mouse Always On:** (checkbox, checked)
- Run on startup:** (checkbox, unchecked)
- Autoplay Enable:** (checkbox, unchecked)
- Autoplay Duration(sec):** 30 (text input)
- Autoplay auto-start enable:** (checkbox, unchecked)
- Sort icons by Effects:** (checkbox, unchecked)
- Enable Pulsating Highlight:** (checkbox, checked)
- Camera always on:** (checkbox, unchecked)
- Buttons:** Camera Configuration, Generate Licence Information, Apply New Licence
- Footer:** Copyright, OM Interactive Ltd, OMI Host Version: 2.8.5.0, Language: Default, Licence Type: App Creator
- OK** button at the bottom.

Sistēmas iestatījumi

Iestatījumu izvēlnē varat:

- Izvēlieties lietojumprogrammas sīktēla vai mapes ikonas izmēru
 - Iestatiet programmatūras automātisko palaišanu
 - Iespējot automātisko atskaņošanu
 - Iestatiet lietojumprogrammas izpildlaiku sekundēs, ja ir iespējota automātiskā atskaņošana
 - Iestatiet automātisko atskaņošanu, lai tā sāktos automātiski, kad sistēma tiek ieslēgta
 - Kārtot ikonas pēc efekta
 - Pārbaudiet kameras kalibrēšanas iestatījumus
 - Ģenerēt licences informāciju
 - Pieteikties jaunai licencei
 - Skatīt programmatūras versijas informāciju
- Sīkāka informācija par iepriekš minētajiem elementiem ir atrodama tālāk norādītajās sadaļās.

Sistēmas iestatījumu detaļas

Ikonas lielums: varat izvēlēties galvenā ekrāna ikonu lielumu, kas attēlo jūsu mapi vai lietojumprogrammas.

Programmatūras automātiskā palaišana: šī funkcija nodrošinās, ka omiSurface programmatūra tiek palaista automātiski, ieslēdzot sistēmu.

Iespējot automātisko atskaņošanu: Šī funkcija, ja tā ir iespējota, pievieno automātiskās atskaņošanas ikonu galvenā ekrāna augšdaļai un pēc tam ļauj automātiski atskaņot visas lietojumprogrammas no mapes, kurā pašlaik atrodaties.

Lai izmantotu šo funkciju, ar tālvadības pulti pārvietojieties uz ikonu un noklikšķiniet uz Labi, lai sāktu automātisko atskaņošanu. Ikonas krāsa mainīsies uz violetu. Lai apturētu šo funkciju, noklikšķiniet uz "Labī", lai apturētu pašreizējās lietojumprogrammas darbību, pēc tam atgriezieties pie automātiskās atskaņošanas ikonas un noklikšķiniet uz Labi, lai atceltu.

Automātiskās atskaņošanas ilgums: ļauj kontrolēt, cik ilgi katra darbība jūsu izvēlētajā mapē tiek izpildīta, pirms tā automātiski pāriet uz nākamo lietojumprogrammu.

Automātiskās atskaņošanas automātiskās palaišanas iespējošana: ļauj iestatīt automātisko atskaņošanu, lai tā automātiski sāktos, startējot programmatūru.

Kārtot ikonas pēc efekta: ļauj mainīt darbību attēlošanas secību pēc to efekta, nevis alfabētiskā secībā.

Automātiskā atskaņošana iespējota




Kameras kalibrēšana

Pēc lietojumprogrammu testēšanas jūs varat atklāt, ka sistēmai ir nepieciešami daži jutības pielāgojumi.

Visas sistēmas tiek pārbaudītas un kalibrētas mūsu rūpnīcā pirms piegādes, taču atšķirīgi apgaismojuma apstākļi var mainīt lietojumprogrammas darbības jutību. Piemēram, ja vidē, kurā sistēma tiek izmantota, nonāk spēcīgs dienasgaismas/saules gaismas līmenis, tas var samazināt jutību, kas var nozīmēt, ka roku kustības pāri projicētajam attēlam neaktivizēs mijiedarbību precīzi. Šādā gadījumā sistēmas iestatījumos ir jāpielāgo jutība.

Lai to izdarītu, nospiediet tālvadības pults pogu Labi, lai atgrieztos galvenās izvēlnes ekrānā, un pēc tam izpildiet tālāk norādītās instrukcijas:

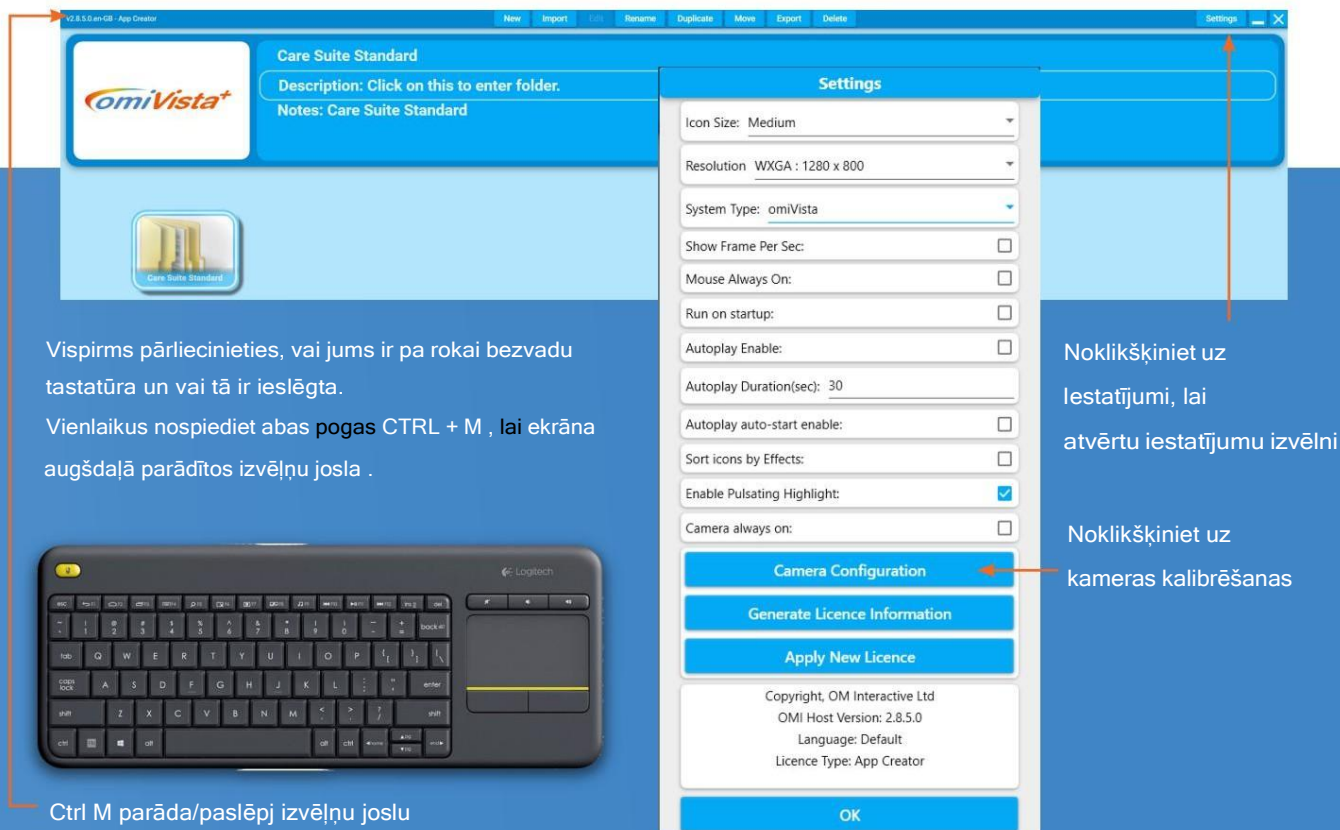

Vispirms pārliecinieties, vai jums ir pa rokas bezvadu tastatūra un vai tā ir ieslēgta.

Vienlaikus nospiediet abas pogas CTRL + M, lai ekrāna augšdaļā parādītos izvēlnu josla.

Ctrl M parāda/paslēpj izvēlnu joslu

Noklikšķiniet uz Iestatījumi, lai atvērtu iestatījumu izvēlni

Noklikšķiniet uz kameras kalibrēšanas

Grīdas kalibrēšana:

V3 2021 omiVista Mobii kameras iestatījumi prasa kalibrēšanu šādām situācijām: mazas grīdas, lielas grīdas, maza galda un liela galda projekcijas. Iestatiet omiVista Mobii uz zemāko augstuma iestatījumu mazas grīdas režīmam. Pārliecinieties, vai četri kalibrēšanas punkti apakšējā kreisajā logā ir iestatīti projicētajā attēla stūros. Ja nē, tos var pielāgot, izmantojot peles paliktni un peles pogas bezvadu tastatūras labajā pusē. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz pogas "Kalibrēt zemāko punktu" un, lai iestatītu zemāko grīdas izmēra kalibrēšanu. Paaugstiniet omiVista Mobii augstumu, līdz projekcija sasniedz aptuveni 2,5 metrus platumā vai augstuma indikators rāda 20 cm, pēc tam iestatiet kalibrēšanas punktus projekcijas stūros kā iepriekš. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz pogas "Kalibrēt augstāko punktu". Tas iestatīs kalibrēšanu augstuma diapazonam, kurā sistēmu var izmantot projicēšanai uz grīdas. Kalibrēšana dinamiski pielāgojas šajā diapazonā, kad ir iestatīti zemākie un augstākie punkti.


Galda kalibrēšana:

Paceliet sistēmu līdz tādām augstumam, kādā tā tiks izmantota uz galda virsmas ar nelielu izvirzījuma laukumu.

Jums vajadzētu redzēt, kā pašreizējā režīma indikators mainās no grīdas režīma uz galda režīmu, un pašreizējais augstums norādīs vairāk nekā 20 cm. Atkārtojiet iepriekš minēto procedūru, iestatot četrus stūra punktus uz projekcijas stūriem kā zemāko punktu, un noteikti noklikšķiniet uz pogas "Kalibrēt zemāko punktu".

Paceliet ierīci tā, lai projekcija aizpildītu galda virsmu, neizplatoties pāri malām, un iestatiet jaunus stūra punktus. Apstipriniet, noklikšķinot uz pogas "Kalibrēt augstāko punktu".

Jūsu sistēma tagad ir kalibrēta gan lietošanai uz grīdas, gan uz galda, un tā dinamiski pielāgos režīmu un kalibrēšanas punktus atkarībā no sistēmas augstuma.

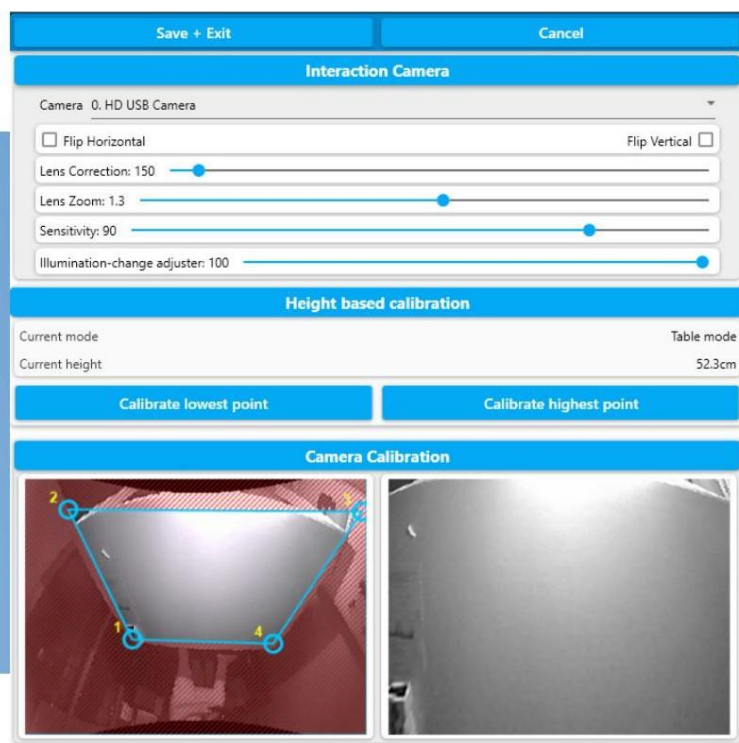

Pašreizējais režīms

Pašreizējā augstuma
indikators

Projekcijas izmēri:

Optimālai veikspējai mēs iesakām šādus projekcijas izmērus:

Galda projekcija no 100 līdz 150 cm platumā

Grīdas projekcija no 200 līdz 260 cm platumā

Licences informācija

Ģenerēt licences informāciju: Visas sistēmas tiks piegādātas jau licencētas, un jums nevajadzētu izmantot šo funkciju, ja vien OMi nenorādīs citādi. Šī poga ļauj pieprasīt sistēmas licenci un ģenerē licences pieprasījuma failu, kas jums būs jānosūta uz support@.omi.uk.

Lietot jaunu licenci: Visas sistēmas tiks piegādātas jau licencētas, un jums nevajadzētu izmantot šo funkciju, ja vien OMi nav norādījis citādi. Šī poga ļauj lietot jaunu licenci, ko jums būs nosūtījis OMi. Ja jums ir nosūtīta jauna licence pa e-pastu, fails jāpārkopē uz USB atmiņas karti, kas jāpievieno USB portiem jūsu omiVista Mobii ierīces sānos. Noklikšķiniet uz pogas "Lietot jaunu licenci" un atrodiet mapi atmiņas kartē, kurā kopējāt failu. Atlasiet failu un noklikšķiniet uz Labi, lai lietu jauno licenci.

Tālvadības pults un tastatūras savienošana pārī

Pārskats



1. Navigācijas pogas
2. Skaļuma pogas
3. Mijiedarbības iesaldēšanas poga
4. Bateriju nodalījums

Pārošana

Tālvadības pults savienošana pārī ar omiVista sistēmu

Jūsu omiVista sistēmas iestatīšana:

1. Izmantojot ārējo tastatūru, nospiediet taustiņu kombināciju CTR + M. galvenajā ekrānā rīkjoslai vajadzētu parādīties ekrāna augšdaļā.
2. Noklikšķiniet uz pogas AIZVĒRT, lai izietu no programmatūras.
3. Noklikšķiniet uz Windows sākuma ikonas ekrāna apakšējā kreisajā stūrī un sāciet rakstīt "Logitech". Pēc tam vajadzētu redzēt opciju "Logitech Unifying Software".
4. Atlasiet Paplašināti.
5. Kreisajā logā vajadzētu redzēt Unify uztvērēju (USB adapteri). Noklikšķiniet uz "Savienot pārī jaunu ierīci".
6. Noņemiet aizmugurējo balto vāciņu no receptības vadība.
7. Izņemiet baterijas no tālvadības pults aizmugures un ievietojiet tās atpakaļ.
8. Pēc tam tālvadības pultij vajadzētu parādīties ierīču sarakstā.

Tastatūras savienošana pārī

Tastatūras savienošana pārī ar omiVista sistēmu

Jūsu omiVista sistēmas iestatīšana:

1. Izmantojot ārējo tastatūru, nospiediet taustiņu kombināciju "CTR + M". galvenajā ekrānā rīkjoslai vajadzētu parādīties ekrāna augšdaļā.
2. Noklikšķiniet uz pogas AIZVĒRT, lai izietu no programmatūras.
izstrādājumi.
3. Noklikšķiniet uz Windows sākuma ikonas ekrāna apakšējā kreisajā stūrī un sāciet rakstīt "Logitech". Pēc tam vajadzētu redzēt opciju "Log-itech Unifying Software".
4. Atlasiet Paplašināti.
5. Kreisajā logā vajadzētu redzēt uni-
Dzīvojošais uztvērējs (USB adapteris) Noklikšķiniet uz Savienot pārī jaunu ierīci.
6. Izslēdziet un ieslēdziet tastatūras barošanu slēdzis.
7. Pēc tam vajadzētu parādīties tastatūrai K400 plus ierīču sarakstā.

Tastatūras ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis



Ctrl M parādīt/paslēpt izvēršņu joslu

Tīrīšanas un dezinfekcijas kontrole

Galvenā iekārta un pamatplāksne

Galvenās ierīces korpuss un pamatplāksne ir pārklāti ar antibakteriālu pulverkrāsu. Sīkāka informācija sniegta tālāk*.

Galveno ierīci, pamatplāksni un elektrisko stāvvadu var tīrīt arī, izmantojot Clinelli® vai līdzīgas universālas salvetes. Pārliecinieties, vai galvenā ierīce ir izslēgta, atdzisusi un ka kontaktdakša ir atvienota no elektrotīkla kontaktligzdas vai rozetes, kā arī no ierīces aizmugures. Esiet uzmanīgi, lai salvetes nebūtu piesūcinātas ar šķidrumu, un rīkojieties īpaši uzmanīgi, lai nesamitrinātu nevienu no ierīces atverēm vai ventilācijas atverēm.

Pirms ierīces atkārtotas pieslēgšanas strāvas padevei, lūdzu, ļaujiet mitrumam iztvaikot, un notīriet kameras un projektoru objektīvus ar mīkstu, tīru un neplūksnjošu drānu, lai noņemtu visas salvešu atstātās svītras.

Tālvadības pults

Tālvadības pulti var arī tīrīt, ievērojot iepriekš minētos piesardzības pasākumus.

Bezvadu tastatūra

Lūdzu, neizmantojiet salvetes bezvadu tastatūras tīrīšanai, ja tās ir mitras. Vispirms izņemiet baterijas un pēc tam iesakām salvetes izspiest tik daudz, lai tās būtu mitras; pretējā gadījumā tastatūra pēc tīrīšanas var nedarboties pareizi. Viegli noslaukiet taustiņus un citas tastatūras daļas un ļaujiet tām rūpīgi nožūt, pirms ievietojat baterijas atpakaļ.



Antimikrobu pārklājums

Antibakteriāla iedarbība: īpaši izstrādāts ar efektīva pretmikrobu līdzekļa papildu priekšrocību, kas iznīcina lielāko daļu baktēriju sugu un kavē kaitīgo baktēriju, sēnīšu un pelējuma veidošanos. Hygienilac ir sasniedzis >Log 3 (99,9%) iznīcināšanas rādītājus 24 stundu laikā pret šādām baktērijām:

- 9 Staphylococcus aureus meticilīnrezistentais celms (MRSA)
- 9 Listeria monocytogenes
- 9 Clostridium difficile Escherichia coli
- 9 Staphylococcus aureus
- 9 Salmonellas enteridīts
- 9 Klebsiella pneimonija
- 9 Aspergillus niger
- 9 Pseudomonas aeruginosa
- 9 Penicillium purpurogenum
- 9 Bacillus cereus
- 9 Saccharmyces cerevisiae

Thermasets TLAB antibakteriālais pulverkrāsojums, kas satur Hygienilac, ir testēts arī neatkarīgās laboratorijās saskaņā ar BS EN 13697 (virsma tests) attiecībā uz Clostridium difficile sporām un atbilst Lielbritānijas standarta prasībām ar >Log 3 (1,0x10³) iznīcināšanas ātrumu.

Specifikācija

Projekcijas specifikācijas

Galda projekcija no 100 līdz 150 cm platumā

Grīdas projekcija no 200 līdz 260 cm platumā

Jaudas specifikācijas Spriegums: 100-

240 V maiņstrāva Frekvence: 50-

60 Hz Jauda gaidīšanas

režīmā: 7,5 vati pie 240 V 50 Hz Eko režīmā: 165 vati

pie 240 V 50 Hz Normāla jauda: 176 vati pie 240

V 50 Hz Maksimālā jauda: 185 vati pie 240 V 50 Hz I

klase (PAT tests kā IT iekārta)

Projektorā gaismas avots

DuraCore lāzers, lāzera kalpošanas laiks: 30 000 stundas

Svars un izmēri Platums: 58 cm / 23 collas

Dziļums: 53 cm / 21 colla

Augstums: 65 cm / 25,5 collas 131 cm / 51,5 collas izstiepts

Svars: 28 kg / 61,7 mārciņas

OmiVista Mobii ir izstrādājis un ražojis OM Interactive Anglijā.



OM Interactive LTD

17 Avebury Court, Mark Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TA, Anglija.

Tehniskais atbalsts:

Apvienotās Karalistes klienti, tālr.: 01442 215555 vai e-pasts:

support@omi.uk. Starptautiskie klienti, sazinieties ar savu reģionālo piegādātāju.