



SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

1020/1120/1220

Gamintojas: Handicare



handicare



Autorių teisės šiame dokumente, įskaitant bei apribojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „išvaizdos“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas atskiai nurodyta toliau, be išankstinio raštinio „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laukti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadavimą, bet kokią išvestinio kūrinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įrašymą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus, spausdinti ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

UAB „Slaugivita“

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279


info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

EasySlide


SystemRoMedic™



190 x 60 cm

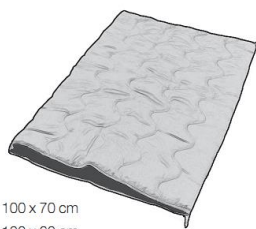

100 x 70 cm
100 x 60 cm

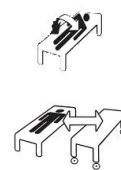

Max: 300kg / 661lbs

EasySlide paklodės naudojamos paversti pacientą lovoje ir perkėlimams tarp lovos ir neštuvų/dušo vežimėlio. EasySlide yra susiūtos rankovės formos paklodės, su paminkštinimu ir trintį mažinančia medžiaga viduje.

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimų lengvinančių priemonių. Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir paciento funkcinių sugebėjimų bei poreikių.



Vaizdinis patikrinimas


Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.

Visada perskaitykite instrukcijas

Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.



Trinties testas

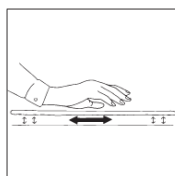

Patikrinkite EasySlide trintį spausdami ir braukdami ranka pirmyn-atgal. Įsitinkite, kad paklodė lengvai slysta. Jei yra galimybė, palyginkite su nauju produktu.

Naudojimas



1



2

Paverskite pacientą ant šono. Tai bus padaryti lengviau naudojant puspaklodę. Pakiškite perkėlimo paklodę po pacientu (1). Išimkite paklodę, kai perkėlimas baigtas (2).

Pastaba



Max 5 cm

1



2

Tarpas tarp perkėlimo paviršių (lovos/vežimėlio/dušo vežimėlio) neturi viršyti 5 cm (1).

Pastaba!

Visada užrakinkite ratus/nuspauskite stabdžius.

Kad išvengtų paciento kritimo/nuslydimo rizikos, niekada nepalikite EasySlide po pacientu, kai perkėlimas yra baigtas.

Medžiaga: poliesteris, mikrofibra, poliamidas.

Gaminio priežiūra: Perskaitykite gaminio etiketę. Nenaudokite temperatūroje.



skalbinių minkštiklių. Džiovinimas žemoje

Modelis	Dydis	Apsauginis užvalkalas	Vienkartinis užvalkalas	Komplektas
1020	190x60 cm	1051	1055	1030=1020+1051
1120	100x60 cm	1151	1155	1130=1120+1151
1220	100x70 cm	1251	1255	1230=1220+1251

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju: Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com**1. Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)