



SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

TurnSheet paklodė

1592

Gamintojas: Handicare



handicare



Autorių teisės šiame dokumente, įskaitant bet kokią jo kopiją, visų dokumentų, failų, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „išvaizdos“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio raštinio „Slaugivita“ leidimo draudžiama argaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadavimą, bet kokio išvestinio kūrinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įtraukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

UAB „Slaugivita“

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

TurnSheet

SystemRoMedic™

TurnSheet paklodė skirta tiesti lovoje ir yra pagaminta iš slidžios medžiagos, kas palengvina pacientų vartymą bei perkėlimą lovoje link galvūgalio. TurnSheet turi dvi dalis: čiužinio uždangalą ir vartymo paklodę. Uždangalas tvirtinamas prie čiužinio, o vartymo paklodė klojama ant uždangalo. Uždangalas turi slidžiąją vidurinę dalį, o jo šonai yra iš neslidžios medžiagos, kad pacientas nenuslystų iš lovos. TurnSheet 140 cm modelio uždangalas susideda iš dviejų dalių, o 200 cm modelis iš trijų.

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimą lengvinančių priemonių. Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir paciento funkcinio sugebėjimų bei poreikių.

Vaizdinis patikrinimas

Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.



Visada perskaitykite instrukcijas

Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.

Trinties testas



Patikrinkite TurnSheet trintį spausdami ir braukdami ranka pirmyn-atgal. Įsitinkite, kad paklodė lengvai slysta. Jei yra galimybė, palyginkite su nauju produktu. Taip pat patikrinkite čiužinio uždangalą. Įsitinkite, kad paviršius nepažeistas ir gerai slysta.

Pastaba

Apsaugokite pacientą nuo netyčinio nuslydimo nuo lovos. Įsitinkite, kad čiužinys pakankamai platus, ir uždangalo neslidus kraštai yra abiejuose čiužinio pusėse. Nepalikite paciento be priežiūros, kol lovos šoninės apsaugos nėra pakeltos.

Naudojimas


1. Pacientas

2. Paklodė

3. TurnSheet


4. Uždangalas

5. Čiužinys

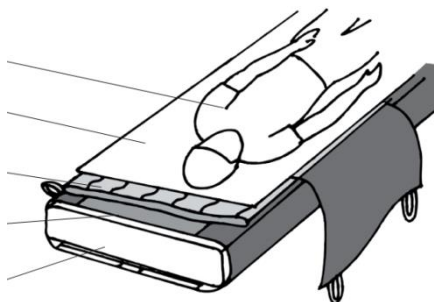


TurnSheet paklodė klojama į lova taip, kaip aprašyta paveiksle. Uždangalas tvirtinamas prie čiužinio juostomis su lipdukais. Vartymo paklodė klojama ant viršaus, slidus paviršius lieka apačioje.

Vartymas su TurnSheet

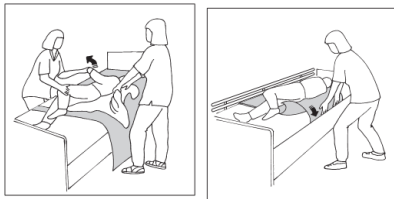


Patraukite pacientą link lovos krašto. Ištraukite puspaklodės ir vartymo paklodės kraštus. Patraukite ir kilstelėkite paklodę, kad paversti pacientą ant šono (žr. paveikslėlį). Užkiškite paklodės ir puspaklodės kraštus po čiužiniu ir pakelkite šonines lovos apsaugas.

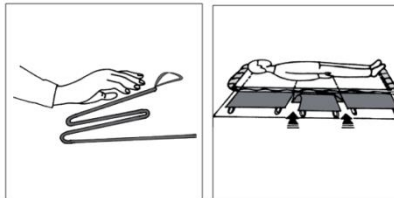

Uždangalo naudojimas

TurnSheet 140 cm modelio uždangalas susideda iš dviejų dalių, o 200 cm modelis iš trijų. Uždangalo apačioje yra slydi medžiaga. Uždangalo dalys gali būti išimamos, kad palengvinti paciento pozicionavimą lovoje. Pavyzdžiui, vidurinė dalis po klubais gali būti išimta, kad išvengtų paciento nuslydimo lovoje žemyn, kai jis atsisėda lovoje.

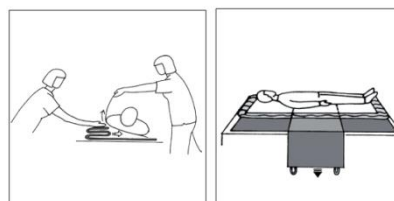

Uždangalo dalis labai lengva išimti/padėti, kadangi jos lengvai slysta. Sulenkite vieną dalies kraštą, pakiškite po pacientu ir stumkite nuo savęs (žr. pav.) Tai padaryti lengviau, jei kitas slaugytojas gali truputi kilstelėti pacientą.

Medžiaga: poliamidas, poliesteris, mikrofibra

Gaminio priežiūra: Perskaitykite gaminio etiketę. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Džiovinimas žemoje temperatūroje.



Kodas	Pavadinimas	Dydis	Lovos dydis
1592	Turn Sheet	200x150 cm	90x120 cm
1588	TurnSheet su kilpomis	200x150 cm	90x120 cm
1583	Čiužinio uždangalas	140 cm	90 cm
1593	Čiužinio uždangalas	200 cm	90 cm
1594	Čiužinio uždangalas	200 cm	105 cm
1595	Čiužinio uždangalas	200 cm	120 cm
1587	Čiužinio uždangalas	200 cm	90 cm

Kodas	Komplektacija	Dydis	Lovos dydis
1580	1583+1592	140x200 cm	90 cm
1590	1593+1592	200x150 cm	90 cm
1586	1588+1587	200x150 cm	90 cm

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com**1. Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)