



SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

WendyLett paklodė

1 6 XX



Gamintojas: Handicare



handicare



UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

Autorių teisės šame dokumente, įskaitant bei apribojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafikas, esantį jame, ir šio dokumento bendros „Slaugivita“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio raštinio „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadrovimą, bet kokio švedinio kūrinių sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo (jaukumą) kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

WendyLett

SystemRoMedic™



WendyLett yra slystanti paklodė, skirta vartymui, vartymuisi ir padėties keitimui lovoje. Ji klojama į lovą kaip paprasta paklodė. WendyLett su virve klojama į lovą ir tvirtinama sutraukus virvelę. WendyLett gali būti naudojama kartu su slidžiomis paklodėmis WendyLett2Way ir WendyLett4Way. WendyLett paklodė būna skirtingų dydžių ir modelių.

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimą lengvinančių priemonių. Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir paciento funkinių sugebėjimų bei poreikių.




Vaizdinis patikrinimas

Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.


Visada perskaitykite instrukcijas

Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.


Pozicionavimas

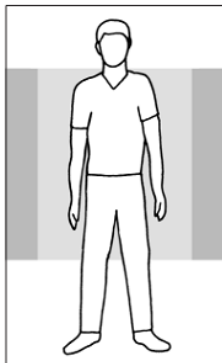


100x200

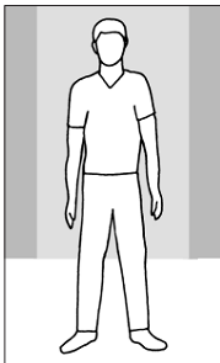

140x200


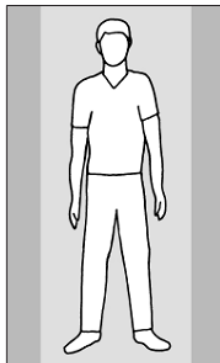


200x200

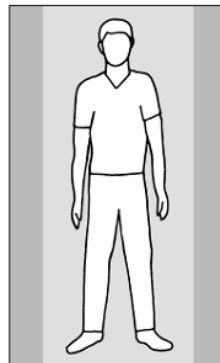

200x220

Dėkite paklodę taip, kad slydus paviršius būtų lovos viduryje. Paklodė WendyLett klojama lovoje, kaip ir įprasta paklodė.

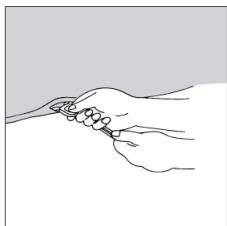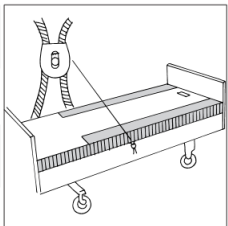

Padėkite paklodę su virve taip, kad slydus paviršius būtų lovos viduryje. Pritvirtinkite paklodę patraukdami už virvelės ir užfiksuodami reikiamoje padėtyje abėjose lovos pusėse. Įsitinkite, kad neslidūs paklodės kraštai lygiai pakloti iš abėjų lovos kraštų. Jie apsaugo pacientą nuo iškritimo iš lovos.

Medžiaga



WendyLett paklodė turi baltas juostas pilkame fone. Juostos parodo slydimo kryptį.



WendyLett2Way paklodė turi pilkas juostas baltame fone. Juostos parodo slydimo kryptį.




WendyLett4Way paklodė yra languota ir turi slystančią medžiagą apačioje. Juostos parodo slydimo kryptį.

Naudojimas




WendyLett gali būti klojama tais atvejais, kai pacientas gali apsiversti savarankiškai. Paklodė sumažina trintį ir palengviną vartymąsi.

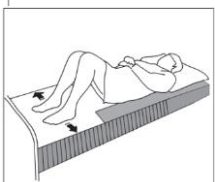


Lygus paklodės paviršius kojų dalyje palengvina pacientui kojų iškėlimą sėdant ant lovos krašto.

Priedai

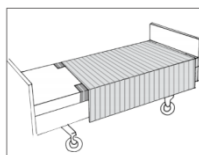

Su WendyLett2Way paklode, pacientas gali lengvai pasiversti ant šono nenuslysdamas lovoje žemyn, kai pakeltas galvūgalis. Taip pat slaugytojas, naudodamas šią paklodę, gali nesunkiai paversti pacientą.

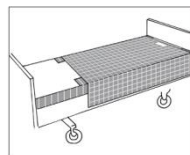

Su WendyLett4Way pacientą galima nesunkiai paversti ant šono, pekelti lovoje aukštyn.

Medžiaga: poliesteris, medvilnė, satinas

Priežiūra:

Perskaitykite gaminio etiketę.

Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Džiovinimas žemoje temperatūroje.



Kodas	Pavadinimas	Išmatavimai	Spalva
1609	WendyLett, 60 cm slydusis paviršius (80/90 cm lovai)	100x200 cm	balta
1614	WendyLett, 60 cm slydusis paviršius (80/90 cm lovai)	140x200 cm	balta
1629	WendyLett, 60 cm slydusis paviršius (80/90 cm lovai)	100x200 cm	Pilka/baltos juostos
1634	WendyLett, 60 cm slydusis paviršius (80/90 cm lovai)	140x200 cm	Pilka/baltos juostos
1639	WendyLett, 70 cm slydusis paviršius (105 cm lovai)	200x200 cm	Pilka/baltos juostos
1667	WendyLett, 100 cm slydusis paviršius (120 cm lovai)	100x220 cm	Pilka/baltos juostos
1668	WendyLett, 100 cm slydusis paviršius (120 cm lovai)	140x220 cm	Pilka/baltos juostos
1669	WendyLett, 100 cm slydusis paviršius (120 cm lovai)	200x220 cm	Pilka/baltos juostos
1641	WendyLett, 70 cm slydusis paviršius (90 cm lovai), su gumele	90x200 cm	Pilka/baltos juostos
1651	WendyLett, 80 cm slydusis paviršius (105 cm lovai), su gumele	105x200 cm	Pilka/baltos juostos
1620	WendyLett 2Way	90x180 cm	balta
1631	WendyLett 2Way	100x200 cm	Baltos/pilkos juostos
1636	WendyLett 2Way	140x200 cm	Baltos/pilkos juostos
1637	WendyLett 4Way	140x200 cm	Pilka/balta languota
1647	WendyLett 4Way	200x200 cm	Pilka/balta languota
1648	WendyLett 4Way, inco	75x200 cm	Pilka (inco)/balta languota
1649	WendyLett 4Way, inco su rankenomis	140x120 cm	Pilka (inco)
1657	WendyLett 4Way, su rankenomis	140x190 cm	Pilka/balta languota

Gamintojas Handicare AB, Švedija

UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, Šiauliai, LT77172, tel. : +370 41 522439, faks.: +370 41 595279

e-mail: info@slaugivita.com, www.slaugivita.com, nemokama linija 8 800 00225

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju: Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. **Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. **Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)