



SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

EasySlide mini perkėlimo paklodė

20xx

Gamintojas: Handicare



handicare



Autorių teisės šioje dokumente, įskaitant bet kokią jo kopiją, yra apsaugomos. Šio dokumento bendros „Slaugivita“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, bet išankstinio rašinio „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar kitiškai visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadavimą, bet kokio išvestinio kopinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įtraukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą trečiesiems asmenims.
Šiame dokumente pateikiama informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

UAB „Slaugivita“

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com


EasySlide

SystemRoMedic™


EasySlide paklodės naudojamos paversti pacientą lovoje ir perkėlimams tarp lovos ir vežimėlio/tualetu, pakelti lovoje aukšty.

EasySlide yra susiūtos rankovės formos paklodės, su paminkštinimu ir trintį mažinančia medžiaga viduje.

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimų lengvinančių priemonių. Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir paciento funkcinio sugebėjimų bei poreikių.

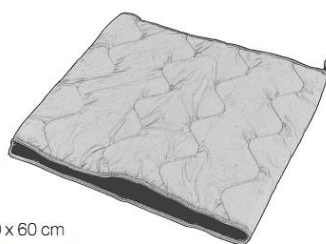

50 x 60 cm
50 x 70 cm

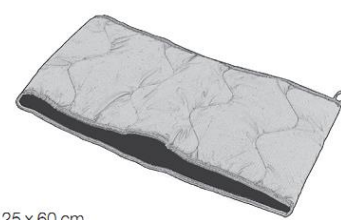

25 x 60 cm



300 kg/661 lbs



Vaizdinis patikrinimas



Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.

Visada perskaitykite instrukcijas

Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.



Trinties testas

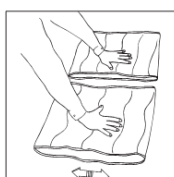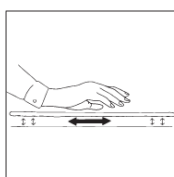

Patikrinkite EasySlide trintį spausdami ir braukdami ranka pirmyn-atgal. Įsitinkite, kad paklodė lengvai slysta. Jei yra galimybė, palyginkite su nauju produktu.

EasySlide naudojimas

Pakiškite EasySlide po vienu klubų ar pečių. Perkėlimui visas paciento kūno svoris turi būti paskirstytas ant EasySlide.

Kad ištraukti paklodę, patraukite už apatinės paklodės dalies.



1

1. EasySlide gali būti naudojama perkėlimams nuo lovos į/iš vežimėlio. Pageidautina naudoti kartu su perkėlimo lentute EasyGlide.



2

2. EasySlide gali būti dedama po paciento pečiais, kad sumažinti trinti keliant pacientą galvūgalio link.



3

3. EasySlide gali būti dedama po klubais, kad palengvinti paciento vartymą lovoje. Aktyvūs pacientai gali naudoti EasySlide savarankiškai, tačiau ir silpnesni pacientai gali naudoti ją su slaugytojo pagalba.



4

Tarpas tarp perkėlimo paviršių (lovos/vežimėlio/dušo vežimėlio) neturi viršyti 5 cm (4).

Pastaba!

Visada užrakinkite ratus/nuspauskite stabdžius.



5

Kad išvengti pacientų kritimo/nuslydimo rizikos, niekada nepalikite EasySlide po pacientu, kai perkėlimas yra baigtas.

Niekada nesodinkite/neguldykite paciento arti lovos krašto.

Medžiaga: poliesteris, mikrofibra, poliamidas

Gaminio priežiūra: Perskaitykite gaminio etiketę. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Džiovinimas žemoje temperatūroje.



Modelis	Išmatavimai	Apsauginis užvalkalas	Vienkartinis užvalkalas	Komplektas
2010	50x60 cm	2051	2055	2030=2020+2051
2015	25x60 cm			
2020	50x60 cm (mikrofibra)	2051	2055	
2011	50x70 cm	2052		
2021	50x70 cm (mikrofibra)	2052		

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpį neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)