



SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

FlexiMove pakėlimo diržas

3012/3020/3030

Gamintojas: Handicare



handicare



Autorių teisės šame dokumente, įskaitant bei apibojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „Slaugivita“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio raštinio „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, parduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadavimą, bei kokią šveitinio kūrinių sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įtraukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

UAB „Slaugivita“


Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

FlexiMove

SystemRoMedic™

FlexiMove diržas naudojamas kaip pagalbinė priemonė perkeliant ar keičiant paciento padėtį. Įprastos situacijos, kai FlexiMove yra naudojamas yra perkėlimas, kėlimas ir perkėlimas lovos galvūgalio link. Kiekviename diržo gale yra po dvi rankenas, kas užtikrina taisyklingą darbinę padėtį slaugytojui. Vidinė dalis gali būti dviejų medžiagų: nailono ir poliesterio. Nailonas yra neslidi medžiaga, kurią lengva dezinfekuoti. Poliesteris yra minkštas ir patogus.

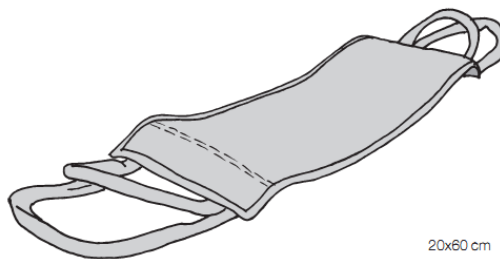

20x60 cm
20x50 cm



Max: 150 kg/330 lbs

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimų lengvinančių priemonių. Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir paciento funkcinių sugebėjimų bei poreikių.

Vaizdinis patikrinimas


Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.

Visada perskaitykite instrukcijas

Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.






Funkcinis testas

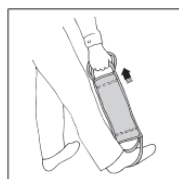

Reguliariai tikrinkite FlexiMove neštuvus koja prispaudę vieną rankeną ir stipriai patraukdami rankenas priešingoje pusėje. Pakartokite procedūrą, kol visos rankenos bus patikrintos.

Naudojimas

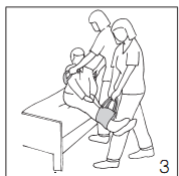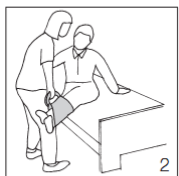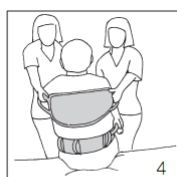

Perkėlimas:

Perkėlimui, pvz. tarp vežimėlio ir lovos, taip pat naudokite perkėlimo lentutę EasyGlide, kartais ir perkėlimo diržą EasyBelt/FlexiBelt (1).

Kėlimas:

Keliant pacientą FlexiMove naudojamas, kad nukelti paciento kojas (2), o vėliau prilaikyti už nugaros (4).

Jeigu pacientui reikia dviejų slaugytojų pagalbos, vienas turi prilaikyti kojas, o kitas paremti nugarą (3). Perkėlimo metu slaugytojai stovi iš abiejų paciento pusių ir naudoja diržo rankenėles taip, kad užtikrintų taisyklingą darbinę padėtį (3,4).

Pakėlimas galvūgalio link:

Kad pakelti galvūgalio link, FlexiMove dedamas po paciento klubais (5).

Patartina kartu naudoti trintį mažinančią priemonę po paciento pečiais, pvz. EasySlide slidžiąją paklodę (6).





SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

Sudėtis: poliamidas, nailonas/poliesteris

Gaminio priežiūra

Perskaitykite gaminio etiketę.

Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Džiovinimas žemoje temperatūroje.

Dydžiai:

3012	20x60 cm, nailonas
3020	20x50 cm, poliesteris
3030	20x60 cm, poliesteris

El. p. info@slaugivita.com
Tel. +370 41 522439
Mob. +370 61608456

www.slaugivita.com
Adresas: Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Įm. kodas: 145440368

PVM mokėtojo kodas: LT454403610
A/S: LT98 7300 0100 8946 0228
AB Swedbank, b/k 73000

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"**GARANTINIS TALONAS**

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama **12 mėn. garantija** nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpį neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com**1. Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)