



SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

FlexiMove neštuvai

401x

Gamintojas: Handicare



handicare



Autorių teisės šiame dokumente, įskaitanti be apribojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „išvaizdos“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio raštinio „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadavimą, bet kokio išvestinio kūrinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įrašymą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

UAB „Slaugivita“

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279


info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

FlexiMove

SystemRoMedic™

FlexiMove neštuvai naudojami įvairiose perkėlimo ir vartymo situacijose, tokiose kaip vartymas lovoje, pakėlimas lovoje aukšty, iš lovos į lovą, dušo vežimėlį, kėlimui nuo grindų. Neštuvai yra su keturiomis ar šešiomis rankenomis. Pasirinkimas priklauso nuo paciento būklės ir reikalingo slaugytojų skaičiaus.

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimų lengvinančių priemonių. Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir paciento funkcinių sugebėjimų bei poreikių.

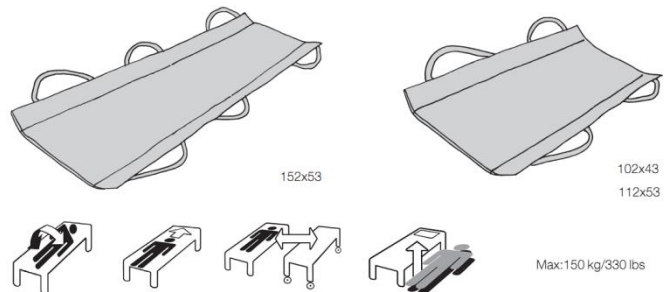

Vaizdinis patikrinimas

Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.

Visada perskaitykite instrukcijas

Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.




Funkcinis testas




Reguliariai tikrinkite FlexiMove neštuvus koja prispaudę vieną rankeną ir stipriai patraukdami rankenas priešingoje pusėje. Pakartokite procedūrą, kol visos rankenos bus patikrintos.

Naudojimas

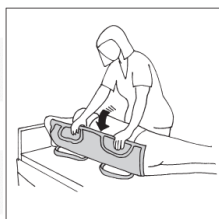


Pacientas paverčiamas ant vieno šono, neštuvai pakišami po pacientu (rankenos užlenkiamos į vidų). Pacientas atverčiamas ant nugaros ir rankenos ištraukiamos.

Pavertimas lovoje

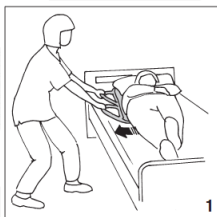

Pakiškite neštuvus po pacientu, kaip aprašyta aukščiau. Naudokite rankenas, kad patraukti pacientą arčiau lovos krašto. Dirbkite žingsnio pozoje lengvai sulenkę kelius, rankas ir nugarą išlaikykite tiesias (1).

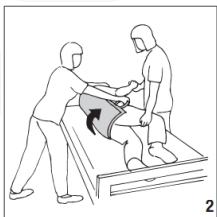

Užlenkite rankenas ir paverskite pacientą į priešingą nuo savęs pusę, kur stovi kitas slaugytojas (2). Jei dirbate vienas, pakelkite šonines lovos apsaugas. Verskite pacientą naudodami kojų raumenis ir stumdami pacientą nuo savęs.

Perkėlimas galvūgalio link


Slaugytojai stovi iš abiejų lovos pusių. Perkėlimą atlikti paprasčiau, jei pacientas gali sulenkti kojas per kelius ir pasistumti aukštyn. Dirbkite žingsnio pozoje lengvai sulenkę kelius, rankas ir nugarą išlaikykite tiesias. Slaugytojai turi suderinti savo veiksmus, kad perkėlimas vyktų sklandžiai.

Iš lovos į lovą/dušo vežimėlį



Slaugytojai turi dirbti dviese ar daugiau, priklausomai nuo paciento būklės. Pristumkite lovas kuo arčiau viena kitos. Pirmiausiai perkelti paciento kojas, po to traukdami ir stumdami perkelti pacientą.

Pakėlimas nuo grindų

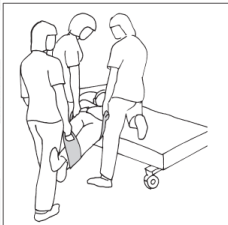

Pastaba! Jei yra galimybė, naudokite mechaninį keltuvą. Jeigu keliate rankiniu būdu, neviršykite leistino svorio.

Slaugytojai turi dirbti dviese ar daugiau, priklausomai nuo paciento būklės. Planuokite perkėlimą, kad minimizuoti perkėlimo laiką bei atstumą.



SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

Sudėtis: poliamidas, nailonas

Gaminio priežiūra

Perskaitykite gaminio etiketę.

Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Džiovinimas žemoje temperatūroje.

Valymas: išimkite vidinį pakietinimą ir valykite dezinfekcijos priemonėmis.

Užvalkalas gali būti skalbiamas skalbyklėje vadovaujanti etiketės informacija.



Dydžiai:

4011	102x43 cm
4012	112x53 cm
4016	152x53 cm

UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, Šiauliai, LT77172, tel. : +370 41 522439, faks.: +370 41 595279

e-mail: info@slaugivita.com, www.slaugivita.com, nemokama linija 8 800 00225

El. p. info@slaugivita.com
Tel. +370 41 522439
Mob. +370 61608456

www.slaugivita.com
Adresas: Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Įm. kodas: 145440368

PVM mokėtojo kodas: LT454403610
A/S: LT98 7300 0100 8946 0228
AB Swedbank, b/k 73000

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju: Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpį neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)