



SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

Palaikymo priemonė

EasyBelt – FlexiBelt – ReadyBelt

6014-602_-16025

Gamintojas: Handicare



handicare



Autorių teisės šiame dokumente, įskaitant bei apibojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „išvaizdos“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio raštiško „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadavimą, bet kokio išvestinio kūrinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įrašymą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spausdinti ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.


UAB “Slaugivita”

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

EasyBelt – FlexiBelt – ReadyBelt

SystemRoMedic™

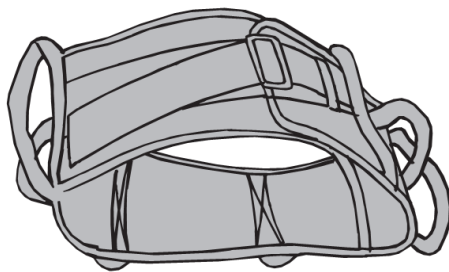

EasyBelt, FlexiBelt ir ReadyBelt diržai naudojami kaip prilaikymo priemonė įvairiose perkėlimo situacijose. Jie negali būti naudojami kaip pagalbinė priemonė pacientų kėlimo situacijose. Vidinė diržo EasyBelt dalis yra su nailono pamušalu, kas palengvina jo priežiūrą ir dezinfekciją. FlexiBelt ir ReadyBelt diržo vidinė dalis iš švelnios medžiagos maloni odai. Abi medžiagos yra neslystančios.

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimų lengvinančių priemonių. Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir paciento funkcinių sugebėjimų bei poreikių.



Vaizdinis patikrinimas


Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.

Visada perskaitykite instrukcijas

Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.




Funkcinis testas

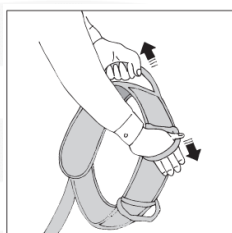

1

Stipriai patraukite rankenas skirtingomis kryptimis (1).

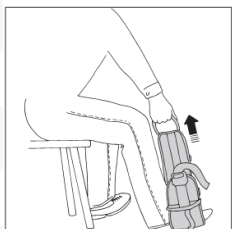


2

Susekite diržą, uždėkite ant diržo vieną koją ir patraukite už vienos rankenos (2). Pakartokite šį veiksmą su kiekviena rankena.

Kaip uždėti EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt



1. Apjuoskite diržą apie pacientą žemiau juosmens.
2. Užsekite diržą ir patemkite apatinę dalį (žr. paveikslėlį).

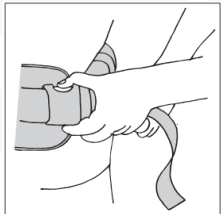

EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt nuėmimas

Atsekite sagtį, atlaisvinkite visas juostas ir nuimkite diržą.

EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt naudojimas



1

Slaugytojai gali dirbti porose ar po vieną, priklausomai nuo paciento būklės, kadangi diržai turi keletą vertikalių ir horizontalių rankenų. Kryžminė rankų padėtis už paciento nugaros užtikrina gerą palaikymą ir teisingą darbinę padėtį (1 ir 2).



2



3

Kai pacientą prilaiko du slaugytojai, patartina stovėti iš abiejų paciento pusių, prilaikant už rankenų nugarinėje dalyje (kryžminių būdu) ir laikant rankenas, esančias diržo priekyje (3).



4

Diržai padeda prilaikyti pacientą perkeltant nuo vežimėlio ant lovos (4).

**Sudėtis:**

EasyBelt: poliamidas, nailonas

FlexiBelt: poliamidas, poliesteris

ReadyBelt: poliamidas, poliesteris

Gaminio priežiūra

Perskaitykite gaminio etiketę.

Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Džiovinimas žemoje temperatūroje.

Kodas	Modelis, dydis	Išmatavimai	Liemens apimtis	Rankenos	Medžiaga viduje
6012	EasyBelt XS	75x12 cm	45-70 cm	5	Nailonas
6013	EasyBelt S	105x12 cm	60-100 cm	7	Nailonas
6014	EasyBelt M	120x12 cm	70-120 cm	9	Nailonas
6015	EasyBelt L	135x12 cm	100-160 cm	11	Nailonas
6023	FlexiBelt S	105x12 cm	60-100 cm	7	Poliesteris
6024	FlexiBelt M	120x12 cm	70-120 cm	9	Poliesteris
6025	FlexiBelt L	135x12 cm	100-160 cm	11	Poliesteris
6026	FlexiBelt XL	150x12 cm	115-175 cm	13	Poliesteris
16025	ReadyBelt L	140x10 cm	70-110 cm	11	Poliesteris

UAB "Slaugivita"

Dubijos g.16, Šiauliai, LT 77172, tel. : +370 41 522439, faks.: +370 41 595279

e-mail: info@slaugivita.com, www.slaugivita.com, nemokama linija 8 800 00225

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpį neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)