



SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

**Ross SitWalk juosta
6080**

Gamintojas: Handicare



handicare



Autorių teisės šiame dokumente, įskaitant bet kokių visų dokumentų, failų, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „Slaugivita“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, bet išankstinio raštinio „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar liudyti visų turinių ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadavimą, bet kokio išvestinio kūrinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo (jaukimo) kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešuosius dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

UAB „Slaugivita“
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

SitWalk



Skirta naudoti:

„Ross SitWalk“ priemonė yra naudojama kilstelėti pacientus giliau į kėdę ar invalido vežimėlį.

Savybės:

„SitWalk“ juostos konstrukcija yra labai tvirta, o keturių padėčių pamuštos rankenos abiejose jos pusėse leidžia stipraiai ir saugiai laikyti pacientą, todėl labai palengvina slaugytojo darbą.

Trumpa informacija

Prekės nr.	Gaminys	Dydis	Rankenos
6080	SitWalk	12 x 140 cm	8

SitWalk vadovas

Taikymas:

Perkelti pacientą gyčiau į sėdynę.



Maksimalus apkrovimas:

135 kg

Funkcionalumo patikrinimas:



Vizualinis patikrinimas: funkcionalumą reikia patikrinti prieš naudojimą ir vėliau daryti tai reguliariai, ypač po skalbimo. Patikrinkite, kad siūlės ir rankenos būtų nepažeistos.

Mechaninis apkrovimas: Patraukite už kiekvienos rankenos ir pažiūrėkite, ar jos atlaiko didelį apkrovimą. Jeigu pastebėsite susidėvėjimo požymių, priemonės nebenaudokite.

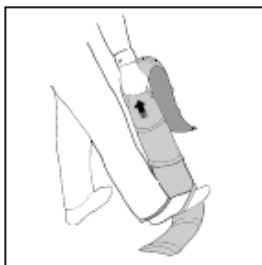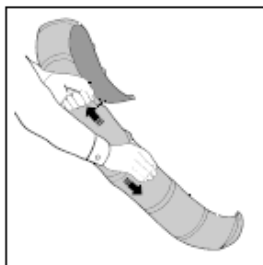

Uždėjimas:

Pakiškite juostą po paciento šlaunimis, kuo arčiau klubų. Rankenos turėtų likti išorėje, ne prie kūno. Patraukite rankenas vienu metu iš kairės ir iš dešinės, kad juosta atsidurtų po sėdmenimis. Žr. 1 pav.

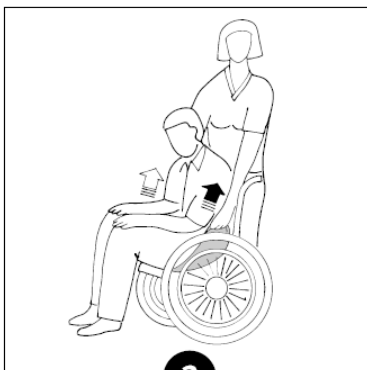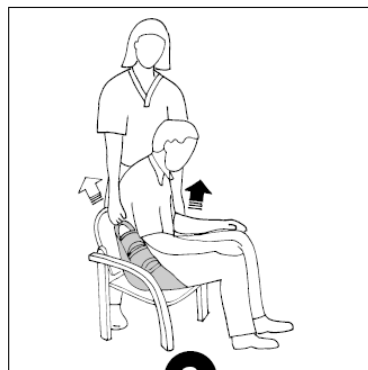**1****2****3****Perkėlimas:**

Pacientas turėtų atsisėsti ant priemonės arba šiek tiek pasilenkti pirmyn. Palenkite jo kūną į vieną šoną ir timptelkite jį į reikiamą padėtį. Tą patį kartokite su kairiuoju ir dešiniuoju šonu, kol pacientas sėdės norimoje padėtyje. Ištraukite juostą iš po sėdmenų. Žr. 6 pav.

**4****5****6**

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju: Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. **Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. **Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)