



SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

Pasikėlimo diržas FlexiGrip

6090

Gamintojas: Handicare



handicare




Autorių teisės šiam dokumente, įskaitant bei apribojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „švaidos“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio rašiško „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laisvai visų turimų ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadavimą, bet kokią išvestinio kopijavimo remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įtraukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šiam dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

UAB „Slaugivita“

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

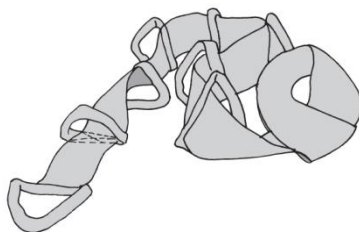

Max: 150 kg/330 lbs

FlexiGrip pagalbos diržas naudojamas kaip pagalbinė priemonė pacientui atsisėsti lovoje, atsikelti iš lovos. Diržas tvirtinamas prie lovos galo ir turi kelias rankenas abiejose pusėse, kurios įgalina pacientą pasikelti į sėdimą poziciją.

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimų lengvinančių priemonių. Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir paciento funkcinio sugebėjimų bei poreikių.


Vaizdinis patikrinimas

Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.

Visada perskaitykite instrukcijas


Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.

Funkcinis testas

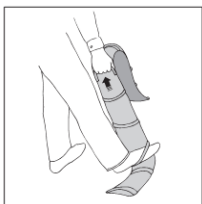

Uždėkite ant diržo vieną koją ir patraukite už vienos rankenos. Pakartokite šį veiksmą su kiekviena rankena. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.


FlexiGrip diržo naudojimas

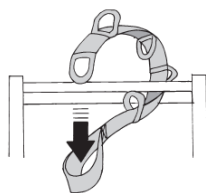

Pritvirtinkite diržą perverdami per kilpą diržo gale (žr. paveikslėlį). Įsitinkite, kad tvirtinimo vieta atlaikys besikeliančio paciento svorį.



1

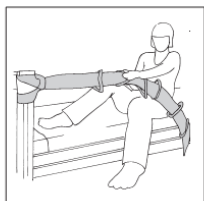

2

Palikite FlexiGrip diržą lovoje, kad pacientui prireikus būtų nesunku juo pasinaudoti (1).

Pacientas gali judėti į sėdimą poziciją kilpą po kilpos naudodamas FlexiGrip (2). Pacientas taip pat gali naudoti FlexiGrip diržą kaip papildomą atramą, sėdint ant lovos krašto.

Persikėlimas į/iš vežimėlio naudojant FlexiGrip



FlexiGrip gali būti naudojamas persikėlimams iš/į vežimėlį. Pacientas prisilaikydamas už diržo, gali palengva judėti nuo vežimėlio ant lovos ir atvirkščiai.

Sudėtis:

poliesteris

Išmatavimai:

9x175 cm, 8 rankenos

Gaminio priežiūra:

Perskaitykite gaminio etiketę. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Džiovinimas žemoje temperatūroje.

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)