



SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

Perkėlimo lenta RollerSlide

9145

Gamintojas: Handicare



handicare



Autorių teisės šiame dokumente, įskaitant bei apibojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „Švaizdos“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio raštinio „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadavimą, bet kokio švestinio kūrinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo traukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

UAB „Slaugivita“


Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

RollerSlide

SystemRoMedic

RollerSlide perkėlimo lenta daugiausiai naudojama horizontaliems perkėlimams nuo lovos ant operacinio stalo/dušo vežimėlio/rentgeno stalo. RollerSlide yra 3 modelių (RollerSlide, RollerSlide Flexi ir RollerSlide Light) ir dviejų ilgių: trumpesnės pakišamos po pusės kūno, ilgesnės po visu kūnu. Ilgesnis modelis yra sulenkiamas pusiau, kad būtų lengviau transportuoti ir perkelti pusiau sėdimoje pozicijoje.

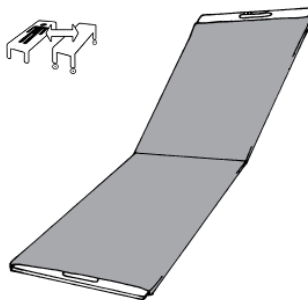

RollerSlide: 9120, 9110		
MAX 180 kg 230 lbs MAX 10 cm 3,9"	MAX 130 kg 287 lbs MAX 15 cm 5,9"	MAX 180 kg 265 lbs MAX 20 cm 7,9"
RollerSlide: 9145, 9155, 9148, 9158		
MAX 200 kg 440 lbs MAX 10 cm 3,9"	MAX 170 kg 375 lbs MAX 15 cm 5,9"	MAX 180 kg 396 lbs MAX 20 cm 7,9"
RollerSlide: 9170, 9175		
MAX 300 kg 661 lbs MAX 10 cm 3,9"	MAX 280 kg 616 lbs MAX 15 cm 5,9"	MAX 300 kg 661 lbs MAX 20 cm 7,9"



Vaizdinis patikrinimas


Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.

Visada perskaitykite instrukcijas

Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.




Funkcinis patikrinimas


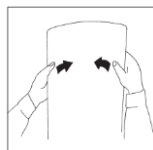


Atsargiai pabandykite sulenkti perkėlimo lentą, kad patikrinti jos tvirtumą. Lenta turi būti elastinga ir tvirta tuo pačiu metu. Nebenaudokite perkėlimo lentos, kai jos tvirtumas yra sumažėjęs.

Naudojimas

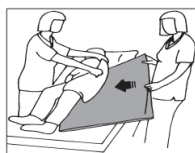

Paverskite pacientą ant šono ir pakiškite lentą po 1/3 kūno. Kad ištraukti, paverskite pacientą ant šono, ir ištraukite RollerSlide lentą.

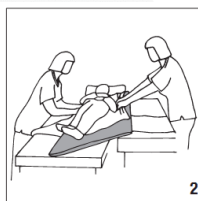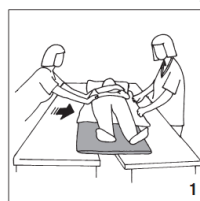

Slaugytojai turi stovėti iš abiejų paciento pusių, stumti ir traukti taisyklingoje pozicijoje (1). Tarpas tarp perkėlimo paviršių neturi viršyti 20 cm. Perkėlimo lentą galima naudoti, kai tarp perkėlimo paviršių yra nežymus aukščių skirtumas. RollerSlide lenta turi būti išimta prieš atliekant rentgeną, tačiau RollerSlide Light modelis gali likti po pacientu rentgeno metu.

Gaminio priežiūra

Perskaitykite gaminio etiketę.

Valykite su dezinfekcijos priemone. Slydusis užvalkalas gali būti skalbiamas skalbyklėje. Džiovinimas žemoje temperatūroje.



Sudėtis: poliamidas, polietilenas

Kodas	Dydis	Modelis	Max išlaikomas svoris	Užvalkalas	Vienkartinis užvalkalas
9120	175x50	Light	135 kg	9136	9138
9110	85x50	Light	135 kg	9156	9168
9145	175x50		150 kg	9136	9138
9155	85x50		150 kg	9156	9168
9148	175x50	Flexi	150 kg	9136	9138
9158	85x50	Flexi	150 kg	9156	9168

UAB "Slaugivita", Dubijos 16, Šiauliai, LT77172, tel. : +370 41 522439, faks.: +370 41 595279
 e-mail: info@slaugivita.com, www.slaugivita.com, nemokama linija 8 800 00225

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju: Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminyje (įrenginyje) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminyje (įrenginyje) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)