



GAMINIO INSTRUKCIJA

Pozicionavimo priemonės Curera Positioning

Gaminiai:

- Curera® padėties reguliavimo pagalvė
- Curera® padėties reguliavimo ritininė atrama
- Curera® pagalvė nugarai
- Curera® pagalvė kaklui
- Curera® Multi pillow pagalvė
- Curera® atrama

Gamintojas:



UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

Vartotojo instrukcijos numeris: 95-001005



CE



Turiny

Svarbios saugos priemonės	3
Įvadas	4
Valymas	4
Kita informacija	5

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas

Įspėjimas!

1. Gaminys turi būti naudojamas tik pagal šioje instrukcijoje nurodytą paskirtį. Gaminio negali derinti, surinkti ar taisyti su kitomis nei šioje instrukcijoje ar kitoje Care of Sweden dokumentacijoje nurodytomis dalimis, priedais ar atsarginėmis dalimis.
2. Higieninis užvalkalas neleidžia prasiskverbti skysčiui ar orui, tačiau jis laidus garams. Užtikrinkite, kad pacientas yra tinkamoje padėtyje, kad išvengtumėte uždusimo rizikos.
3. Reguluokite gaminio padėtį ir naudokite jį taip, kad jis nejstrigtų ar nebūtų pažeistas. PASTABA: ypatingai saugokite, kad jis nebūtų pažeistas dėl įstrigimo naudojant lovos turėklus.
4. NENAUDOKITE arti ugnies šaltinių/karštų paviršių, tokių kaip krosnelių, degančių cigarečių ar karštų lempų. Nors gaminys yra išbandytas dėl gaisro, jį galima pažeisti, jei liesis su ugnies šaltiniais.

1. Įvadas

Prieš naudodami visada perskaitykite vartotojo instrukciją.

1.1. Bendra informacija

Ši sistema yra medicininė įranga, turinti CE ženklą pagal MDD 93/42/EEC. Sistema buvo išbandyta ir patvirtinta pagal tokius standartus: SS 876 00 01, SS 876 00 04, SS 876 00 02, SS-EN-ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN-ISO 12952, EN 14126.

1.2. Paskirtis

Curera® Positioning – tai pagalvių ir atramų, skirtų palengvinti ir reguliuoti pacientų padėtį visose sveikatos priežiūros vietose, asortimentas. Gaminių asortimentas yra platus ir atitinka poreikius atramai ir palengvinimui. Tačiau, net naudojant Curera® Positioning visada reikalinga keisti padėtį. Padėties reguliavimas reikalingas, kad būtų patogų vartotojui, visada svarbu klausti, ką pacientas jaučia. Kad pacientas geriau ir patogiau jaustųsi nerekomenduojame, kad higieninis užvalkalas tiesiogiai liestųsi prie odos. Naudokite Curera® Positioning taip, kad nebūtų tempimo ir kontraktūros. Padėties reguliavimas gali būti atliekamas remiantis diagnoze ir turėtų būti parenkamas atsižvelgiant į bet kokias kontraindikacijas.

Šiuos gaminius lengva naudoti ir pagalves galima naudoti keletu skirtingų būdų.

1.3. Gaminio aprašymas

Curera® Positioning yra kelių formų ir dydžių.

Padėties reguliavimo ritininė atrama yra tokių dydžių: 15x60, 20x125, 20x225 cm.

Padėties reguliavimo pagalvė yra tokių dydžių: 25x80, 50x60, 50x85 cm.

Multi pillow pagalvė yra tokio dydžio: 75x75 cm.

Pleišto formos atrama yra tokio dydžio: 70x26x15/5 cm.

Pagalvė kaklui yra tokio dydžio: Ø50 cm.

Pagalvė nugarai yra tokio dydžio: 50x85 cm.

Medžiaga: padėties reguliavimo ritininė atrama, Multi Pillow pagalvė, padėties reguliavimo pagalvė, pagalvė kaklui: 50% porolonas, 50% poliestero pluoštas.

Pleišto formos atrama: 100% padidinto elastingumo HR putų poliuretanai.

Garantija: 1 metai.

1.4. Išpakavimas

Iš pradžių įsitikinkite ar nepažeista pakuotė. Jei randama pažeidimų, prieš naudojant gaminį susisieki su tiekėju.

2. Valymas

Prieš naudojant gaminį kitam vartotojui svarbu laikytis žemiau pateiktų nurodymų. Kai dvejote, pasikonsultuokite su asmeniu, atsakingu už higieną, ar tiekėju, kurie padės ir duos nurodymus.

2.1. Įprastas valymas

Vidinė pagalvė

Jei naudojamas higieninis užvalkalas, jis apsaugo vidinę pagalvę ir jos valymas retai kada reikalingas. Jei dėl kokios nors priežasties reikia valyti vidinę pagalvę, plaukite skalbyklėje maks. 95° C temperatūroje. Pagalvę galima džiovinti elektriniame džiovintuve maks. 100°C temperatūroje, venkite perdžiovinimo. Kad greičiau išdžiūtų, pakartokite sukimo ciklą 3-4 kartus.

Higieninis užvalkalas (priedas)

	Užvalkalus galima nuvalyti švelnia valymo priemone (pvz. plovimo skysčiu) ir vandeniu ar tam tikslui skirta dezinfekcine priemone alkoholio pagrindu/valikliu. Taip pat galima naudoti Perform, Virkon ar Desisoft. Ekskrementų ir kraujo dėmės būtina nedelsiant pašalinti šaltu vandeniu. Atidžiai laikykitės vietinių instrukcijų ir valiklio vartojimo instrukcijų.
---	---



Kelių sluoksnių užvalkalus prieš skalbimą reikia išskirti. Skalbkite su panašių spalvų skalbiniais.

	Valikliai chloro ar fenolio pagrindu gali daryti neigiamą įtaką PU paviršiui ir jų reikėtų vengti. Jei naudojamas chloras, rekomenduojamas maks. 1% mišinys.
---	--

PASTABA!

Kiekvieną kartą valydami gaminį patikrinkite užvalkalą. Jei jis pažeistas, jį būtina pakeisti arba sutaisyti.

3. Kita

3.1. Laikymas

Visuomet laikykite gaminius kambario temperatūroje sausoje vietoje. Užtikrinkite, kad gaminys laikomas tokioje vietoje, kur jis nebus pradurtas, daužomas ar šalia kitų daiktų, kurie gali jį pažeisti. Venkite tiesioginių saulės spindulių poveikio.

3.2. Ženklimas

Gaminys turi etiketę, kurioje nurodyta pagaminimo data, gaminio numeris, dydis, priežiūros ir skalbimo nurodymai ir EAN brūkšninis kodas.

3.3. Garantija

Šiam gaminiui suteikiama vienerių metų garantija. Garantija galioja gamybos klaidoms. Garantija negalioja įprastam gaminio nusidėvėjimui ar būklės pablogėjimui ar pažeidimams, kurie atsirado dėl nerūpestingo elgesio su gaminiu ar netinkamos jo priežiūros.

3.4. Aptarnavimas ir priežiūra

Gaminiui nereikalingas joks kitas aptarnavimas ar priežiūra išskyrus valymą, kaip aprašyta vartotojo instrukcijoje.

3.5. Perdirbimas

Gaminiai yra visiškai perdirbami ir turėtų būti perdirbami kaip „degios atliekos“. Išardymas nereikalingas.

3.6. Grąžinimas ir skundai

Skundai turi būti pateikiami tiekėjui. Grąžinimas atliekamas laikantis tiekėjo nurodymų ir gali būti atliekamas po to, kai pateikiamas skundas. Apie pažeidimus transportavimo metu turi būti pranešama transportuojančiam agentui.

3.7. Simbolių apibrėžimai

XXXX-XX-XX			
Metai-mėnuo-diena	Skaityti vartotojo instrukciją	Turintis CE ženklą pagal MDD93/42/EEC	Klasifikavimas pagal degumą
			
Negalima dėti į buitines atliekas, laikytis perdirbimo instrukcijų	Perdirbimas	Garantijos trukmė	Nuvalyti
			
Nelyginti	Skalbti skalbyklėje 95°C temperatūroje	Džiovinti džiovyklėje	Pakabinti džiūti negręžiant
			
Cheminis valymas draudžiamas	Chloras		

Pagaminta

Care of Sweden

Kontaktai:

Tel.: +46 771 106600

Faks.: +46 325 12840

El. paštas: info@careofsweden.se

Internetas: www.careofsweden.com

Adresas:

Care of Sweden AB

Box 158

SE-512 24 Svenljunga

Švedija

Apsilankymų/krovinių adresas:

Boråsvägen 14

SE-512 53 Svenljunga

Švedija

Tiekėjas

UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, 77172 Šiauliai, Lietuva

Tel. +370 41 522439






Fax. +370 41 595279

E-mail: info@slaugivita.com

www.slaugivita.com

© Care of Sweden AB, 2011

Care of Sweden ir Curera yra Care of Sweden AB prekiniai ženklai.

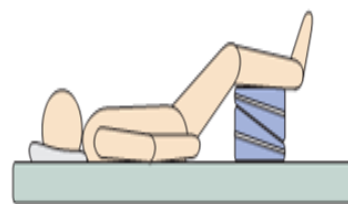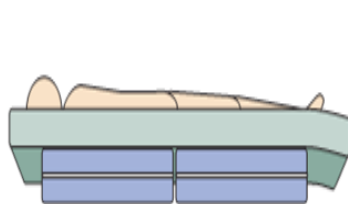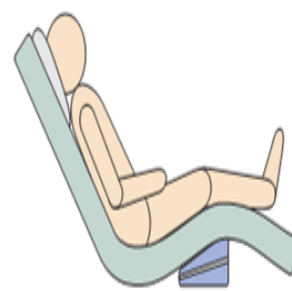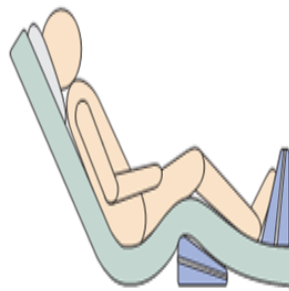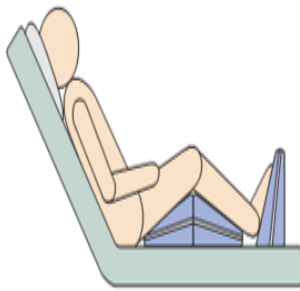

CE

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"
GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas:

Modelis:

Serijos Nr.:

Pardavimo data: _____ PVM Sąskaitos-faktūros SLS Nr.:

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 24 garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: Jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" nepriima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pagėdautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204

info@slaugivita.com

www.slaugivita.com

1. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)